

Que faire une fois le résultat connu ?

Si le résultat est positif (deux lignes)

Contactez votre sage-femme ou votre gynécologue qui pourra confirmer votre grossesse après évaluation des examens cliniques et de laboratoire. Dans certaines situations particulières, le test peut afficher un résultat faux positif. Vous recevrez également des informations complémentaires et des conseils concernant votre grossesse. Voir aussi la section « Limites du test ».

Si le résultat est négatif (une ligne)

Si vous avez des raisons de suspecter une grossesse (par exemple, en cas de retard de règles), vous pouvez effectuer un nouveau test après quelques jours. Si le résultat reste négatif, vous devez consulter votre sage-femme ou votre gynécologue. Voir aussi la section « Limites du test ».

Principe de fonctionnement

La gonadotrophine chorionique humaine (hCG) est une hormone sécrétée dans les urines, dont la production par le placenta en développement débute peu après la fécondation. Le test de grossesse contient des anticorps qui réagissent spécifiquement avec cette hormone. Lorsque l'échantillon d'urine est appliqué sur la mèche du stylo test, l'action de la capillarité permet au fluide de migrer vers la zone de test de la membrane, où il forme une ligne colorée. L'absence de cette ligne colorée indique un résultat négatif. À titre de contrôle, une ligne colorée apparaît dans la zone de contrôle si le test a été correctement effectué

Informations importantes

1. Ce kit de test est réservé exclusivement à un usage externe. Ne pas avaler.
2. À jeter après la première utilisation. La bandelette de test ne peut pas être réutilisée.
3. Ne pas utiliser le kit de test après la date limite d'utilisation indiquée.
4. Ne pas utiliser le kit de test si le sachet en aluminium est endommagé ou mal scellé.
5. Tenir hors de portée des enfants.

Conservation et stabilité

1. Conserver entre 4 °C et 30 °C dans le sachet en aluminium scellé jusqu'à la date limite d'utilisation.
2. Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, de l'humidité et de la chaleur.
3. NE PAS CONGELER.
4. Ne pas ouvrir le sachet en aluminium avant d'être prêt à réaliser le test.

Limites du test

1. Comme pour tout test de diagnostic, un diagnostic de grossesse confirmé ne doit être établi que par un professionnel de santé qualifié, après évaluation des examens cliniques et de laboratoire.
2. Si un échantillon d'urine est trop dilué (c'est-à-dire présentant une faible densité urinaire), il peut ne pas contenir une concentration représentative d'hCG. Si une grossesse est tout de même suspectée...

...il convient de patienter 48 heures avant d'effectuer un nouveau test avec un nouvel échantillon d'urine.

3. Une faible concentration d'hCG en tout début de grossesse peut entraîner un résultat négatif. Dans ce cas, un nouveau test doit être réalisé après 48 heures en utilisant un nouvel échantillon d'urine.
4. Des taux élevés d'hCG peuvent être causés par un petit nombre d'affections autres qu'une grossesse. Par conséquent, la détection de l'hCG dans l'urine ne doit pas être utilisée pour diagnostiquer une grossesse, à moins que ces affections n'aient préalablement été écartées.
5. Une grossesse normale ne peut pas être distinguée d'une **grossesse extra-utérine** sur la seule base du taux d'hCG. De même, les fausses couches spontanées peuvent prêter à confusion lors de l'interprétation des résultats du test.
6. Les traitements contre l'infertilité à base d'hCG peuvent donner des résultats erronés. Consultez votre médecin.
7. Ce test est destiné à une analyse de dépistage qualitative. Il n'est pas conçu pour déterminer des concentrations quantitatives d'hCG.
8. Ce dispositif est exclusivement destiné à l'analyse d'urine humaine.
9. Un échantillon d'urine contaminé ou la présence de substances interférentes dans l'urine peuvent fausser les résultats.
10. La contamination du dispositif de test peut entraîner un résultat erroné.

Résultats attendus

Des résultats négatifs sont attendus chez les femmes en bonne santé qui ne sont pas enceintes ainsi que chez les hommes en bonne santé. Bien que les taux initiaux d'hCG chez les femmes enceintes puissent varier, il est possible avec...

...le test de grossesse précoce Babyplan permet de détecter une grossesse dès le jour présumé des règles. Le test peut être utilisé pour détecter une grossesse plus tôt, mais avec une précision moindre.

Sensibilité et précision

Sensibilité :

Le test de grossesse précoce Babyplan réagit à l'hCG si la concentration d'hCG est de 10 mIU/ml ou plus.

Précision :

La fiabilité du test de grossesse précoce Babyplan a été établie par des tests de laboratoire utilisant des quantités connues d'hormone lutéinisante (hLH), d'hormone folliculo-stimulante (hFSH) et de thyroïdostimuline (hTSH). Des résultats négatifs ont été obtenus pour tous les tests effectués avec 300 mIU/ml de hLH, 300 mIU/ml de hFSH et 1 000 µIU/ml de hTSH.

Questions et réponses

Il y a une grande différence de couleur entre les lignes de contrôle de deux tests. Dois-je m'en préoccuper ?

Non. Les variations de couleur de la ligne de contrôle n'affectent pas le résultat du test.

Les résultats du test peuvent-ils être lus après plus de cinq minutes ?

Non. Les résultats du test doivent être lus dans les 5 minutes. Bien qu'un résultat positif ne devrait pas changer avant plusieurs jours, un résultat négatif peut se transformer en un faux positif quelques minutes seulement après la fin du temps de lecture. Il est préférable de toujours lire le résultat précisément après les 5 minutes de test, puis de jeter le dispositif afin d'éviter toute confusion.

Une couleur de fond rose et des lignes horizontales sont apparues dans la zone de lecture pendant le test. Dois-je m'en préoccuper ?

Non. La structure chimique peut varier d'un échantillon d'urine à l'autre, tout comme l'humidité ambiante de la pièce. Ces variations des conditions physiques peuvent entraîner l'apparition de légères lignes horizontales et/ou d'une coloration rose en arrière-plan, mais cela n'affecte pas le résultat du test. Tant que la ligne de contrôle apparaît dans les cinq minutes, le test fonctionne correctement.

Bibliographie

1. Canfield RE, Morgan FJ, Kammerman S, Bell JJ, Agosto GM. Studies of human chorionic gonadotropin. Recent Prog Horm Res. 1971; 27:121-164.
2. Ross GT. Clinical relevance of research on the structure of human chorionic gonadotropin. American Journal of Obstetrics and Gynecology 1977; 129:795.

Explication des symboles sur l'emballage

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | Tenir à l'abri de la lumière du soleil |  | Ne pas réutiliser |
|  | Garder au sec |  | Date limite d'utilisation |
|  | Conserver entre 4°C et 30°C |  | Consulter les instructions d'utilisation |
|  | Dispositif médical de diagnostic in vitro |  | Code du lot |
|  | Référence du catalogue |  | Attention : consulter les instructions d'utilisation |
|  | Contenu suffisant pour tests |  | Mandataire dans l'Union européenne |
|  | Importateur | | |

One Step HCG Urine Test

 W1-M14 10mIU

 0123



Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.

No. 8, Lizhishan Road, Science City
Luogang District
510663 Guangzhou, Chine
Tél: 0086-20-8711-1194
E-mail: sales@wondfo.com.cn



Qarad BV

Cipalstraat 3
2440 Geel
Belgique



E-Invasion A/S

Artillerivej 86,1
2300 København S
Danemark
E-mail: info@babyplan.fr



Babyplan®

Quand les grands rêves sont sur le point de se réaliser, ce sont souvent les petits détails qui font toute la différence. Laissez Babyplan vous accompagner pour optimiser vos chances de conception.

Babyplan.fr

FR

Babyplan®
Test de grossesse
précoce
Stylo

Mode d'emploi



Version 1.0
SE 24052026
Cat.No. W1-M14 10mIU

Le test de grossesse précoce Babyplan est un test rapide que vous pouvez facilement réaliser vous-même. Le test détecte la présence de la gonadotrophine chorionique humaine (« hCG ») dans l'urine à un stade très précoce de la grossesse. Réservé exclusivement à l'autodiagnostic in vitro. Usage externe uniquement.



Avez-vous pensé à l'acide folique ?

Réalisation du test

Contenu de l'emballage

- Un sachet en aluminium contenant une bandelette de test réactive et un sachet déshydratant. Le sachet déshydratant est inclus uniquement à des fins de conservation et ne doit pas être utilisé lors de la procédure de test.
- Un mode d'emploi.

Matériel complémentaire requis

- Un récipient propre et sec (en plastique ou en verre) pour le recueil de l'échantillon d'urine.
- Un chronomètre (montre ou horloge).

Recueil et préparation de l'échantillon d'urine

Quand recueillir l'échantillon d'urine ?

Pour un test de grossesse, l'échantillon d'urine peut être prélevé à tout moment de la journée. Cependant, **l'utilisation des premières urines du matin est optimale**, car elles présentent la **concentration la plus élevée en hCG**.


Comment recueillir l'échantillon d'urine ?

L'urine peut être recueillie dans n'importe quel récipient propre et sec, en plastique ou en verre.



Signale des informations importantes

Réalisation du test

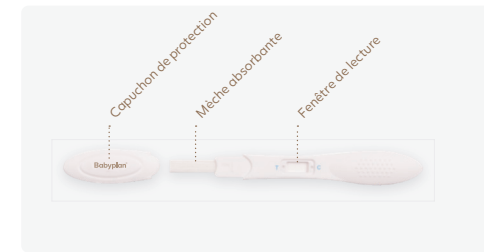

1. Pour commencer le test, ouvrez le sachet en aluminium et retirez le stylo test en déchirant le long de la perforation.
2. Tenez le stylo test d'une main et retirez le capuchon de protection de l'autre main afin de libérer la mèche absorbante.




3. Maintenir la mèche absorbante dirigée vers le bas et la placer directement **sous le jet d'urine pendant au moins 10 secondes**, afin qu'elle soit suffisamment imbibée.*

Alternativement, vous pouvez recueillir un échantillon d'urine dans un récipient propre et sec et **immerger la moitié de la mèche absorbante dans l'urine pendant au moins 5 secondes**.



Ne pas laisser le niveau d'urine dépasser la ligne maximale (MAX), sous peine de compromettre le bon fonctionnement du test.

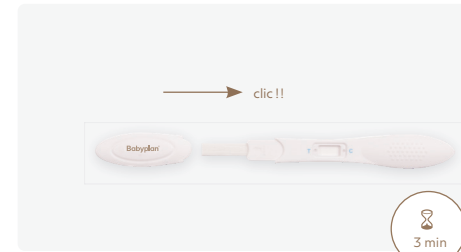


4. Remettre le capuchon de protection en place et attendre que les lignes colorées apparaissent. Un résultat positif peut apparaître dès 1 minute. Cependant, il convient d'attendre **la totalité du temps de réaction de 3 minutes pour confirmer un résultat négatif**.



Ne pas interpréter le résultat au-delà de 5 minutes

Interprétation des résultats

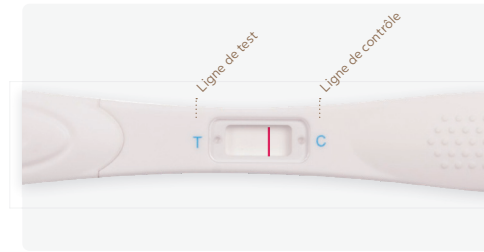

Négatif (pas de grossesse) :

Une seule ligne colorée apparaît dans la zone de contrôle. Aucune ligne visible n'apparaît dans la zone de test. Cela indique qu'aucune grossesse n'a pu être détectée.



Positif (grossesse) :

Des lignes colorées distinctes apparaissent dans les zones de contrôle et de test. Cela indique que vous êtes enceinte. L'intensité de la couleur des lignes peut varier, car la concentration d'hCG évolue selon les différents stades de la grossesse.



Invalide :

Aucune ligne n'apparaît, ou seule la ligne de test apparaît sans la ligne de contrôle. Refaire le test en utilisant un nouveau stylo test. Si ce nouveau test échoue également, veuillez contacter le revendeur ou le point de vente où vous avez acheté le produit, en indiquant le numéro de lot (LOT) du test.



Si la couleur dans la zone de test est pâle, il est recommandé d'effectuer un nouveau test après 48 heures.