

Que faire une fois le résultat connu ?

Si le résultat est positif (deux lignes)

Contactez votre sage-femme ou votre gynécologue qui pourra confirmer votre grossesse après évaluation des examens cliniques et de laboratoire. Dans certaines situations particulières, le test peut afficher un résultat faux positif. Vous recevrez également des informations complémentaires et des conseils concernant votre grossesse. Voir aussi la section « Limites du test ».

Si le résultat est négatif (une ligne)

Si vous avez des raisons de suspecter une grossesse (par exemple, en cas de retard de règles), vous pouvez effectuer un nouveau test après quelques jours. Si le résultat reste négatif, vous devez consulter votre sage-femme ou votre gynécologue. Voir aussi la section « Limites du test ».

Principe de fonctionnement

La gonadotrophine chorionique humaine (hCG) est une hormone sécrétée dans les urines, dont la production par le placenta en développement débute peu après la fécondation. Le test de grossesse contient des anticorps qui réagissent spécifiquement avec cette hormone. Lorsque la mèche du stylo test est mise en contact avec l'urine, l'action de la **capillarité** permet au fluide de migrer vers la zone de test de la membrane, où il forme une ligne colorée. L'absence de cette ligne colorée indique un résultat négatif. À titre de contrôle, une ligne colorée apparaît dans la zone de contrôle si le test a été correctement effectué.

Informations importantes

- 1. Ce kit de test est réservé exclusivement à un usage externe. Ne pas avaler.
- 2. À jeter après la première utilisation. Le stylo test ne peut pas être réutilisé.
- 3. Ne pas utiliser le kit de test après la date limite d'utilisation indiquée.
- 4. Ne pas utiliser le kit de test si le sachet en aluminium est endommagé ou mal scellé.
- 5. Tenir hors de portée des enfants.

Conservation et stabilité

- 1. Conserver entre 4 °C et 30 °C dans le sachet en aluminium scellé jusqu'à la date limite d'utilisation.
- 2. Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, de l'humidité et de la chaleur.
- 3. **NE PAS CONGELER.**
- 4. Ne pas ouvrir le sachet en aluminium avant d'être prêt à réaliser le test.

Limites du test

- 1. Comme pour tout test de diagnostic, un diagnostic de grossesse confirmé ne doit être établi que par un **professionnel de santé qualifié**, après évaluation des examens cliniques et de laboratoire.
- 2. Si un échantillon d'urine est trop dilué (c'est-à-dire présentant une faible densité urinaire), il peut ne pas contenir une concentration représentative d'hCG. Si une grossesse est tout de même suspectée, il convient de patienter 48 heures avant d'effectuer un nouveau test avec un nouvel échantillon d'urine.

- 3. Une faible concentration d'hCG en tout début de grossesse peut entraîner un résultat négatif. Dans ce cas, un nouveau test doit être réalisé après 48 heures en utilisant un nouvel échantillon d'urine.
- 4. Des taux élevés d'hCG peuvent être causés par un petit nombre d'affections autres qu'une grossesse. Par conséquent, la détection de l'hCG dans l'urine ne doit pas être utilisée pour diagnostiquer une grossesse, à moins que ces affections n'aient préalablement été écartées.
- 5. Une grossesse normale ne peut pas être distinguée d'une **grossesse extra-utérine** sur la seule base du taux d'hCG. De même, les fausses couches spontanées peuvent prêter à confusion lors de l'interprétation des résultats du test.
- 6. Les traitements contre l'infertilité à base d'hCG peuvent donner des résultats erronés. Consultez votre médecin.
- 7. Ce test est destiné à une **analyse de dépistage qualitative**. Il n'est pas conçu pour déterminer des concentrations quantitatives d'hCG.
- 8. Ce dispositif est exclusivement destiné à l'analyse d'urine humaine.
- 9. Un échantillon d'urine contaminé ou la présence de substances interférentes dans l'urine peuvent fausser les résultats.
- 10. La contamination du dispositif de test peut entraîner un résultat erroné.

Résultats attendus

Des résultats négatifs sont attendus chez les femmes en bonne santé qui ne sont pas enceintes ainsi que chez les hommes en bonne santé. Bien que les taux initiaux d'hCG chez les femmes enceintes puissent varier, le test de grossesse Babyplan permet de détecter une grossesse dès **le premier jour de retard des règles**.

Sensibilité et exactitude

Sensibilité:

Le test de grossesse Babyplan réagit à l'hCG lorsque la concentration en hCG est égale ou supérieure à **25 mIU/ml**.

Exactitude:

L'exactitude du test de grossesse Babyplan a été établie par des essais en laboratoire utilisant des quantités connues d'hormone lutéinisante (hLH), d'hormone folliculo-stimulante (hFSH) et de thyroïdostimuline (hTSH). Des résultats négatifs ont été obtenus pour tous les tests effectués avec 300 mIU/ml de hLH, 300 mIU/ml de hFSH et **1000 µIU/ml de hTSH**.

Questions et réponses

Il existe une différence de couleur significative entre les lignes de contrôle de deux tests. Dois-je m'en inquiéter ?

Non. Les variations de couleur de la ligne de contrôle n'affectent pas le résultat du test.

Les résultats du test peuvent-ils être lus après plus de Corrigé : cinq minutes ?

Non. Les résultats du test doivent être interprétés dans un délai de 5 minutes. Bien qu'un résultat positif reste généralement stable pendant plusieurs jours, un résultat négatif peut évoluer vers un faux positif quelques minutes après la fin du temps de lecture. Il est recommandé de toujours lire...

..le résultat à la 5ème minute du test, puis de jeter celui-ci afin d'éviter toute confusion.

Une coloration rose en arrière-plan et des lignes horizontales sont apparues dans la zone de lecture pendant le test. Est-ce un problème ?

Non. La composition chimique de chaque échantillon d'urine peut varier, tout comme l'humidité ambiante de la pièce. Ces variations des conditions physiques peuvent entraîner l'apparition de légères lignes horizontales et/ou d'un fond rosé, mais n'altèrent en rien le résultat du test. Tant que la ligne de contrôle apparaît dans les cinq minutes, le test fonctionne correctement.

Bibliographie

- 1. Canfield RE, Morgan FJ, Kammerman S, Bell JJ, Agosto GM. Studies of human chorionic gonadotropin. Recent Prog Horm Res. 1971; 27:121-164.
- 2. Ross GT. Clinical relevance of research on the structure of human chorionic gonadotropin. American Journal of Obstetrics and Gynecology 1977; 129:795

Explication des symboles sur l'emballage

- Tenir à l'abri de la lumière du soleil
- Garder au sec
- Conserver entre 4°C et 30°C
- Dispositif médical de diagnostic in vitro
- Référence du catalogue
- Contenu suffisant pour tests
- Importateur
- Ne pas réutiliser
- Date limite d'utilisation
- Consulter les instructions d'utilisation
- Code du lot
- Attention : consulter les instructions d'utilisation
- Mandataire dans l'Union européenne

Test rapide de grossesse hCG (Urine)

W1-MII



Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
No. 8, Lizhishan Road, Science City
Luogang District
510663 Guangzhou, Chine
Tél: 0086-20-8711-1194
E-mail: sales@wondfo.com.cn



Qarad BV
Cipalstraat 3
2440 Geel
Belgique



E-Invasion A/S
Artillerivej 86,1
2300 København S
Danemark
E-mail: info@babyplan.fr



Babyplan®

Quand les grands rêves sont sur le point de se réaliser, ce sont souvent les petits détails qui font toute la différence. Laissez Babyplan vous accompagner pour optimiser vos chances de conception.

Babyplan.fr

Babyplan®
Test de grossesse
Stylo

Mode d'emploi



Le test de grossesse Babyplan est un test rapide que vous pouvez réaliser facilement vous-même. Le test détecte la présence de la gonadotrophine chorionique humaine (« hCG ») dans l'urine dès le début de la grossesse. Réservé exclusivement à l'autodiagnostic in vitro. Pour usage externe uniquement.



Avez-vous
pensé à l'acide
folique ?

Réalisation du test

Contenu de l'emballage

- Un sachet en aluminium contenant un **test de grossesse stylo** et un sachet déshydratant. Le sachet déshydratant est inclus uniquement à des fins de conservation et ne doit pas être utilisé lors de la procédure de test.
- Un mode d'emploi

Matériel complémentaire requis

- Un récipient (en plastique ou en verre) propre et sec pour le recueil de l'échantillon d'urine (facultatif).
- Un chronomètre (montre ou horloge)

Quand réaliser le test ?

Pour un test de grossesse, l'échantillon d'urine peut être prélevé à tout moment de la journée. Cependant, **l'utilisation des premières urines du matin est optimale**, car elles présentent la **concentration la plus élevée en hCG**.



Signale des informations importantes

Procédure de test



- Pour commencer le test, ouvrir le sachet en aluminium en le déchirant le long de l'encoche de pré-découpe et en retirant le test stylo.
- Tenir le dispositif d'une main et retirer le capuchon de protection de l'autre afin de dégager la mèche absorbante.




- Maintenir la mèche absorbante dirigée vers le bas et la placer sous le jet d'urine pendant **au moins 10 secondes** afin qu'elle soit suffisamment humidifiée.*

Alternativement, vous pouvez recueillir un échantillon d'urine dans un récipient propre et immerger la moitié de la mèche absorbante dans l'urine pendant **au moins 3 secondes**.



Ne pas dépasser la ligne maximale (MAX). Dans le cas contraire, le test risque de ne pas fonctionner correctement.

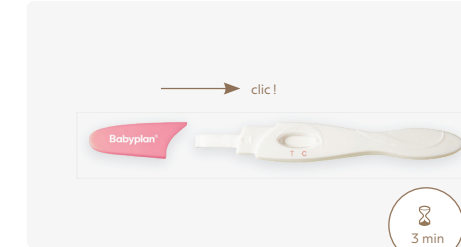

- Remettre le capuchon de protection en place et attendre que les lignes colorées apparaissent. Un résultat positif peut apparaître dès 1 minute. Cependant, il convient d'attendre **la totalité du temps de réaction de 3 minutes pour confirmer un résultat négatif**.



Ne pas interpréter le résultat au-delà de 5 minutes

Hur tolkas rezultaten?



Négatif (pas de grossesse) :

Une seule ligne colorée apparaît dans la zone de contrôle. Aucune ligne visible n'apparaît dans la zone de test. Cela indique qu'aucune grossesse n'a pu être détectée.



Positif (grossesse) :

Des lignes colorées distinctes apparaissent dans les zones de contrôle et de test. Cela indique que vous êtes enceinte. L'intensité de la couleur des lignes peut varier, car la concentration d'hCG évolue selon les différents stades de la grossesse.



Invalide :

Aucune ligne n'apparaît, ou seule la ligne de test apparaît sans la ligne de contrôle. Refaire le test en utilisant un nouveau stylo test. Si ce nouveau test échoue également, veuillez contacter le revendeur ou le point de vente où vous avez acheté le produit, en indiquant le numéro de lot (LOT) du test.



Si la couleur dans la zone de test est pâle, il est recommandé d'effectuer un nouveau test après 48 heures.