

- Appuyer sur l'icône de l'application  Eveline pour lancer l'application.
- Appuyer  sur l'icône pour interpréter le résultat.
- Fixer le test sur le lecteur intelligent (Fig. 1.1) et positionner le lecteur intelligent sur votre smartphone (Fig. 1.2).
- Remarque : Veiller à retirer le capuchon de protection avant de fixer le test sur le lecteur intelligent (Fig. 2).
- Suivre les instructions de l'application pour positionner le lecteur intelligent au-dessus de la zone colorée. Une fois correctement positionné, un cercle rose apparaît à l'écran (Fig. 2). Ajuster la position du lecteur intelligent de sorte que le cercle rose s'insère parfaitement dans le cadre repère.
- Remarque : Ne pas interpréter le résultat au-delà de 5 à 10 minutes après l'absorption de l'urine.
- Remarque : L'application ne passe à l'étape suivante que lorsque le test et le lecteur intelligent sont correctement assemblés et positionnés.
- Remarque : Si l'application reste bloquée sur la même page, vérifiez si le test est invalide. Le cas échéant, le test doit être remplacé par un nouveau dispositif avant de réessayer.
- Une fois le cercle correctement aligné, une coche de validation apparaît (Fig. 3). Ne plus déplacer le lecteur intelligent à ce moment-là. Appuyer sur le bouton « Suivant » pour lancer l'analyse.
- Votre statut de fertilité s'affiche après quelques secondes (Fig. 4).

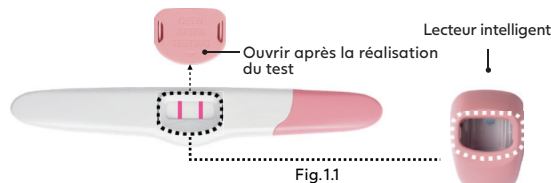


Fig. 1.1

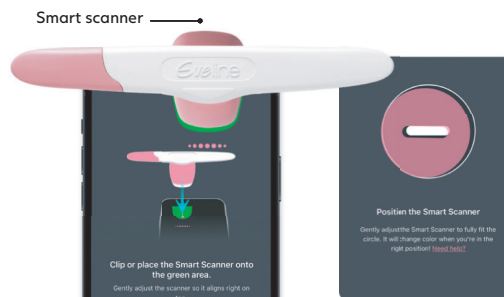


Fig. 1.2

Fig. 2

Statut de fertilité

L'application Eveline indique votre statut de fertilité à l'aide de trois symboles représentant les différents niveaux de fertilité : Faible, Élevé et Maximal.

Fertilité faible : S'affiche pendant les périodes de votre cycle où le taux d'hormones de fertilité est bas.

Fertilité élevée : S'affiche pendant les périodes de votre cycle où le taux de LH augmente. Avoir des rapports sexuels les jours de fertilité élevée augmente considérablement vos chances de conception.

Fertilité maximale : S'affiche pendant les périodes de votre cycle où le taux de LH atteint son maximum. Avoir des rapports sexuels les jours de fertilité maximale vous offre les meilleures chances de concevoir.

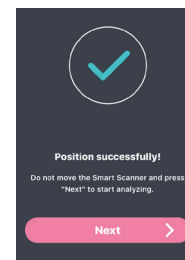


Fig. 3

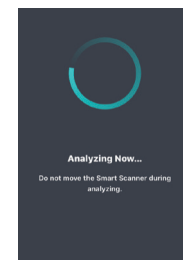


Fig. 4

Questions & Réponses

Q : Dois-je utiliser tous les tests ?

R : Non. Vous pouvez arrêter les tests dès que vous avez atteint le niveau de « Fertilité élevée » et conserver les tests restants pour un cycle ultérieur si nécessaire.

Q : Quelle est la fiabilité du test d'ovulation Eveline ?

R : Lors d'essais en laboratoire, le test s'est avéré fiable à plus de 99% pour détecter le pic de LH. Le test d'ovulation Eveline présente une sensibilité diagnostique de 25mUI/mL.

Q : J'ai effectué tous les tests requis, mais je n'ai toujours pas détecté de pic de LH. Que dois-je faire ?

R : Le nombre de tests contenus dans une boîte de tests d'ovulation Eveline est suffisant pour permettre à la majorité des femmes ayant des cycles réguliers de détecter leur pic de LH. Certaines femmes n'ovulent pas à chaque cycle et ne présenteront donc pas de pic de LH durant ces périodes. Si vous avez des inquiétudes concernant vos résultats, veuillez consulter votre médecin ou votre sage-femme.

Q : Les conditions médicales ou les traitements médicamenteux peuvent-ils altérer le résultat du test ?

R : Certaines pathologies ou conditions médicales peuvent altérer de manière significative la fiabilité du test pour prédire l'ovulation. C'est le cas notamment en cas de grossesse, en période post-partum (après l'accouchement), après une interruption de grossesse, en cas de SOPK (syndrome des ovaires polykystiques), de kystes ovariens, de ménopause ou d'hypothyroïdie non traitée. De même, si vous suivez un traitement de l'infertilité contenant de la LH (hormone lutéinisante) ou de l'hCG (gonadotrophine chorionique humaine), cela peut fausser les résultats du test. Si vous êtes sous traitement par citrate de clomifène, veuillez consulter votre médecin afin de déterminer le moment idéal pour commencer les tests. Les femmes présentant une pathologie médicalement diagnostiquée

de troubles de la fertilité doivent consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit.

Q : Les contraceptifs oraux peuvent-ils influencer les résultats ?

R : Après l'arrêt d'une contraception orale, vos cycles peuvent être irréguliers et mettre un certain temps à se stabiliser. Il est recommandé de s'accorder deux cycles consécutifs avant de commencer à utiliser ce produit. Suivez les recommandations de votre médecin concernant le moment idéal pour débuter votre projet de grossesse.

Q : Dans la mesure où le test indique mes périodes fertiles, puis-je utiliser le test d'ovulation Eveline comme moyen de contraception ?

R : Non. Les spermatozoïdes pouvant survivre plusieurs jours, une grossesse reste possible en cas de rapport sexuel ayant lieu avant la détection du pic de LH.

Q : J'utilise le test d'ovulation Eveline depuis plusieurs cycles et je ne suis toujours pas enceinte. Pourquoi ?

R : La conception est un processus biologique complexe influencé par de nombreux facteurs. De ce fait, l'obtention d'une grossesse peut nécessiter plusieurs mois. Si vous n'êtes pas enceinte après 6 cycles consécutifs, ou si vous avez d'autres questions, veuillez consulter votre médecin ou votre sage-femme.

Spécifications techniques

Modèle : WHM-A01
Dimensions du support fourni : 50,2 (L) x 28,4 (l) x 32,6 (H) mm
Dimensions du test : 116,5 (L) x 18,2 (l) x 8 (H) mm
Sensibilité : ≥25 mUI/mL
Plage de température de fonctionnement : 10 à 30 °C (50 à 86 °F)
Température de stockage des bandelettes : 4 à 30 °C (39 à 86 °F)

Signification des symboles sur l'emballage

	Consulter la notice d'utilisation		Ne pas réutiliser
	Code du lot		Date de péremption
	Référence du catalogue		Limite de température : 4 °C à 30 °C
	Dispositif médical de diagnostic in vitro		Attention
	Fabricant		Distributeur
	Mandataire dans la Communauté européenne		

 iXensor Co., Ltd.
6F, No.9, Aly. 2, Ln.35, Jihu Rd.,
Neihu Dist., Taipei City 11492, Taiwan



 MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Allemagne

 Filial af E-Invasion A/S
Stålkulegatan 2 E
SE-212 28 Malmö
E-mail: info@babyplan.fr

Eveline pour Babyplan



Lorsque les grands rêves s'apprennent à devenir réalité, ce sont souvent les petits détails qui font toute la différence. Laissez Babyplan vous accompagner pour maximiser vos chances de conception.

Babyplan.fr

Eveline

Test d'ovulation

Notice d'utilisation

Le test Eveline et son application associée ont été développés pour vous accompagner dans votre projet de grossesse en identifiant les jours les plus fertiles de chaque cycle.