

EN SE DK NO FI DE NL FR IT ES



smiley reader

pregnancy test strip

User Manual

Användarmanual

Brugervejledning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Bedienungsanleitung

Gebruikershandleiding

Manuel d'utilisation

Manuale utente

Manual de usuario

P/N: 251030

Rev. 10.2025

CONTENTS

User Manual (English)	2
Användarmanual (Svenska)	7
Brugervejledning (Dansk)	12
Bruksanvisning (Norsk)	17
Käyttöohje (Suomi)	22
Bedienungsanleitung (Deutsch)	27
Gebruikershandleiding (Nederlands)	33
Manuel d'utilisation (Français)	39
Manuale utente (Italiano)	44
Manual de usuario (Español)	49

Please read all the information in this Insert before performing the test.

One Step HCG Test Strip is an in vitro diagnostic home use test device intended for the rapid determination of human chorionic gonadotropin (hCG) in urine to aid in the early detection of pregnancy. You can easily carry out yourself.

It is intended for self-testing use.

For in vitro diagnostic use only.

HOW DOES IT WORK?

Human chorionic gonadotropin (hCG) is a hormone, produced by the developing placenta and secreted into the urine. The pregnancy test contains antibodies which specifically react with this hormone.

When the sample end of the test is dipped in the urine specimen, the urine specimen is applied to the strip and migrates along the strip.

When hCG in the sample reaches the Test Zone region of the membrane, it will form a colored line. Absence of this colored line suggests a negative result.

A colored line will appear at the Control Zone region if the test has been performed properly.

CONTENT OF THE TEST KIT

1. One pouch containing a reaction strip.
2. Leaflet with instructions for use.

WHAT ELSE DO YOU NEED?

A clean, dry, plastic or glass container to collect the urine.
Timer or clock.

PRECAUTIONS

1. This kit is for external use only. Do not swallow.
2. Discard after first use. The test strip cannot be used more than once.
3. Do not use the test past the expiration date printed on the foil pouch.
4. Do not use the kit if the pouch is punctured or not well sealed.
5. Keep out of the reach of children.

STORAGE AND STABILITY

1. Store at 4°C to 30°C in the sealed pouch up to the expiration date.
2. Keep away from direct sunlight, moisture and heat.
3. DO NOT FREEZE.
4. You should perform the test soon after opening the pouch. You should keep the test in a dry environment before use.

WHEN TO COLLECT URINE FOR THE TEST?


For many women, HCG may be detectable with this test by the day after the missed period. Any urine specimen is appropriate for Pregnancy Testing but the first morning urine specimen is optimal because of its highest concentration of HCG.

HOW TO COLLECT URINE?

Urine specimens may be collected in any clean, dry, plastic or glass container.

HOW TO DO THE TEST?

1. The test strip and urine have to be at room temperature for testing.
2. Remove the test strip from the sealed pouch.
3. Immerse the strip into the urine with the arrow pointing towards the urine. Take the strip out after 5 seconds and lay the strip flat on a clean, dry, non-absorbent surface (such as the mouth of the urine container).
IMPORTANT: Do not allow the urine level to exceed the MAX (marker line), otherwise the test will not perform correct.
4. Read results in five minutes. Positive results may sometimes appear as early as one minute but you should wait the full 5 minutes before determining a negative result. Do not read results after more than 5 minutes.

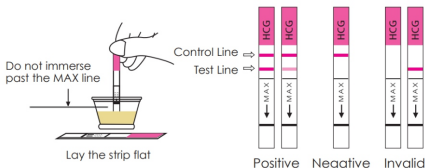

HOW TO READ THE RESULTS?

Negative (not pregnant)

Only one color band appears, in the Control Zone. No apparent band on the Test Zone. This indicates that no pregnancy has been detected.

Positive (pregnant):

Distinct color bands appear in the Control and Test Zones. It indicates that you are pregnant.

Invalid:

No visible band at all, or there is a visible band only in the test region and not in the control region. Repeat with a new test kit.

NOTE: If the color in the Test Zone is weak, it is recommended that the test be repeated in 48 hours, or if the test shows negative but you suspect you may still be pregnant, the test may be repeated after a few days.

WHAT TO DO WHEN YOU KNOW THE RESULT

IF THE RESULT IS POSITIVE (TWO LINES)

Consult your physician. He or she should confirm your pregnancy after evaluating all clinical and laboratory findings. In some rare situations the test may give a false positive result. He or she will also give you further information and advice on your pregnancy. See also "Understanding test results".

IF THE RESULT IS NEGATIVE (ONE LINE)

If you have reasons to believe that you are pregnant (e.g. no menstrual bleeding), you can repeat the test a few days later.

If the test is still negative, consult your physician.
See also "Understanding test results".

UNDERSTANDING TEST RESULTS

1. If a urine sample is too dilute it may not contain a representative level of hCG. If pregnancy is still suspected, another urine specimen should be collected 48 hours later and tested.
2. Low concentration of hCG in a very early pregnancy can give a negative result. In this case, another specimen should be obtained at least 48 hours later and tested.
3. Any treatment with hCG may cause false results.

EXPECTED RESULTS

Although early hCG levels in normal pregnant women vary, this HCG test shows the most accurate results the first day after a missed period.

QUESTIONS & ANSWERS

1. There is much difference between the control lines of two tests. Is this a concern?
No. Variations in the color of the control band will not affect the test result.
2. Can test results be interpreted after more than five minutes?
No. Test results must be read in 5 minutes. A negative result may change to a false positive within minutes after the end of the testing period, which would not be an accurate reading. It is always best to read the results at the 5 minute testing period and then discard the test to avoid confusion.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Sensitivity:

One Step HCG Test has a sensitivity of 10 mIU/ml.

Interfering Substances:

The following potentially interfering substances were added to hCG negative and positive specimens, no interferences were observed.

Acetaminophen, aspirin, ascorbic acid, atropine, caffeine, glucose, hemoglobin, tetracycline, ampicillin, albumin, bilirubin.

Stability after first opening:

The results of the package opened stability studies show that the products quality was stable and valid within 1.5 hours. Given variations in temperature and humidity that may occur, we suggest to use the test immediately after opening.

INDEX OF SYMBOLS

	Manufacturer		Date of manufacture
	European representative		Temperature limit
	Use-by-date		Do not re-use
	Batch code		Consult Instructions
	Caution		In vitro diagnostics
	Contains sufficient for <n> tests		Catalogue number

More details at [Babyplan.com/smile](https://www.babyplan.com/smile)

Läs all information i denna bilaga innan du utför testet.
One Step Graviditetstest sticka är en in-vitro testanordning för hemma bruk avsedd för snabb bestämning av humant koriongonadotropin (hCG) i urinen för att underlätta tidig upptäckt av graviditet. Du kan enkelt utföra testen själv.
Avsett för hemmabruk.
Endast för in-vitro diagnostik.

HUR FUNGERAR DET?

Humant koriongonadotropin (hCG) är ett hormon som produceras av den bildande moderkakan och utsöndras i urinen. Graviditetstestet innehåller antikroppar som specifikt reagerar med detta hormon.

När testens absorberande ände doppas i urinprovet, migrerar urinen längs remsan.

När hCG i provet når membranet i testzonen, kommer det att bilda en färgad linje. Frånvaron av denna färgade linje indikerar ett negativt resultat.

En färgad linje kommer att visas i kontrollzonen om testet har utförts ordentligt.

TESTKITETS INNEHÅLL

1. En påse som innehåller en teststicka.
2. Bruksanvisning.

VAD MER BEHÖVER DU?

En ren, torr, plast- eller glasbehållare för att samla urinen.
Timer eller klocka.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Detta kit är endast avsett för extern användning. Svälj inte.
2. Kassera efter första användning. Teststickan kan inte användas mer än en gång.
3. Använd inte testet efter det utgångsdatum som är tryckt på foliepåsen.
4. Använd inte testen om påsen är punkterad eller inte förseglad.
5. Förvaras utom räckhåll för barn.

LAGRING OCH STABILITET

1. Förvara vid 4°C till 30°C i den förseglade påsen fram till utgångsdatumet.
2. Förvaras undan från direkt solljus, fukt och värme.
3. FRYS INTE.
4. Du bör utföra testet strax efter att påsen har öppnats. Du ska förvara testet i en torr miljö före användning.

NÄR SKA URINPROVET UPPSAMLAS?


För många kvinnor kan HCG vara detekterbart med detta test från dagen efter den uteblivna menstruationen. Varje urinprov är lämpligt för graviditetstest men det första urinprovet på morgonen är optimalt på grund av dess högsta koncentration av HCG.

HUR UPPSAMLAS URINEN?

Urinprover kan uppsamlas i en ren och torr plast- eller glasbehållare.

HUR UTFÖRS TESTEN?

1. Teststickan och urinen måste ha rumstemperatur för testning.
2. Ta ut teststickan från den förseglade påsen.
3. Håll stickan ned i urinen med pilen pekande mot urinen. Ta ut stickan efter 5 sekunder och lägg stickan platt på en ren, torr, icke-absorberande yta (t.ex. kanten på uppsamlingsbägaren).
VIKTIGT! Låt inte urinnivån överstiga MAX (markeringsstrecket) - det kan annars medföra att testet inte fungerar korrekt.
4. Läs av resultatet inom fem minuter. Ibland kan positiva resultat förekomma så tidigt som efter en minut, men man bör vänta hela 5 minuter innan ett negativt resultat avläses. Läs inte av resultat efter mer än 5 minuter.

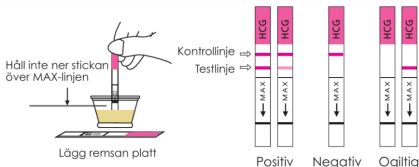

HUR TOLKAS RESULTATEN?

Negativt (inte gravid):

Endast en färgad linje visas i kontrollzonen. Ingen synlig linje i testzonen. Detta indikerar att ingen graviditet har upptäckts.

Positivt (gravid):

Tydliga färgade linjer visas i kontroll- och testzonerna. Det indikerar att du är gravid.

Ogiltig:

Inga synliga linjer alls, eller så finns det bara en synlig linje i testzonen och inte i kontrollzonen. Upprepa med en ny testförpackning.

OBS: Om färgen i testzonen är svag rekommenderas att testet upprepas om 48 timmar, eller om testet visar negativt men du misstänker att du fortfarande är gravid, så kan testet upprepas efter några dagar.

VAD DU GÖR NÄR DU KÄNNER TILL RESULTATET

OM RESULTATET ÄR POSITIVT (TVÅ LINJER)

Kontakta din barnmorska/läkare. Hen bör bekräfta din graviditet efter att ha utvärderat alla kliniska fynd och laboratoriefynd. I vissa sällsynta situationer kan testet ge ett falskt positivt resultat. Hen kommer också att ge dig ytterligare information och råd om din graviditet.

Se även "Förstå testresultat".

OM RESULTATET ÄR NEGATIVT (EN LINJE)

Om du har skäl att tro att du är gravid (t.ex. utebliven menstruationsblödning), kan du upprepa testet några dagar senare. Om testet är fortfarande negativt, kontakta din barnmorska/läkare.

Se även "Förstå testresultat".

FÖRSTÅ TESTRESULTATET

1. Om ett urinprov är för utspätt kanske det inte innehåller en representerativ nivå av hCG. Om graviditet fortfarande misstänks, bör ett annat urinprov uppsamlas 48 timmar senare och testas.
2. Låg koncentration av hCG i en mycket tidig graviditet kan ge ett negativt resultat. I detta fall bör ett nytt prov erhållas vid minst 48 timmar senare och testas.
3. All behandling med hCG kan orsaka falska resultat.

FÖRVÄNTADE RESULTAT

Även om tidiga hCG-nivåer varierar hos normalt gravida kvinnor, visar detta HCG-test det mest exakta resultatet från den första dagen efter utebliven menstruation.

FRÅGOR

1. Det finns en stor skillnad mellan kontrollinjerna i två tester. Är detta något att oroa sig över?
Nej. Variationer i kontrollinjens färg påverkar inte testresultatet.
2. Kan testresultat tolkas efter mer än fem minuter?
Nej. Testresultaten måste läsas inom fem minuter. Ett negativt resultat kan ändras till falskt positivt inom några minuter efter testets avläsningstid och är då inte längre ett korrekt resultat. Det är alltid bäst att avläsa resultatet vid tiden 5 minuter och sedan kassera testen för att undvika förvirring.

PRESTANDA/EGENSKAPER

Känslighet:

One Step Graviditetstest sticka har en känslighet på 10 mIU/ml.

Störande ämnen:

Följande potentiellt störande ämnen tillsattes till hCG negativa och positiva prover utan att det sågs några störningar.

Acetaminophen, aspirin, askorbinsyra, atropin, koffein, glukos, hemoglobin, tetracyklin, ampicillin, albumin, bilirubin.

Stabilitet efter första öppningen:

Resultaten av öppnade paket vid stabilitetsstudier visar att produktkvaliteten var stabil och giltig inom 1,5 timmar. Med tanke på variationer i temperatur och luftfuktighet som kan uppstå, föreslår vi att du använder testa omedelbart efter öppnandet.

INDEX ÖVER SYMBOLER

	Tillverkare		Tillverkningsdatum
	Europeisk representant		Temperaturgräns
	Utgångsdatum		Får ej återanvändas
	Batchkod		Läs bruksanvisningen
	Varning		In vitro-diagnostik
	Innehåller tillräckligt för <n> tester		Katalognummer

Mer information på Babyplan.se/smile

Læs alt informationen i dette bilag, før testen udføres.
 One Step Graviditetstest strimmel er en in-vitro testenhed til
 hjemme brug designet til hurtig bestemmelse af humant
 choriogonadotropin (hCG) i urinen for at hjælpe til tidlig
 påvisning af graviditet. Nem at udføre selv.
 Beregnet til hjemmebrug.
 Kun til in-vitro diagnostisk brug.

HVORDAN VIRKER TESTEN?

Humant choriogonadotropin (hCG) er et hormon, der
 produceres af moderkagen og udskilles i urinen.
 Graviditetstesten indeholder antistoffer, der specifikt reagerer
 med dette hormon.
 Når den absorberende ende af testen dyppes i urinprøven,
 vandrer urinen langs strimlen.
 Når hCG i prøven når membranen i testzonen, danner den en
 farvet streg. Fraværet af denne farvede streg indikerer et
 negativt resultat.
 En farvet streg vises i kontrolzonen, hvis testen er udført korrekt.

INDHOLD AF TESTSÆTTET

1. En pose som indeholder en teststrimmel.
2. Brugsanvisning.

HVAD HAR DU ELLERS BRUG FOR?

En ren, tør, plast- eller glas bæger til opsamling af urinen.
 Timer eller ur.

FORHOLDSREGLER

1. Dette sæt er kun beregnet til ekstern brug. Slug ikke.
2. Kassér efter første brug. Teststrimlen kan ikke bruges mere end én gang.
3. Brug ikke testen efter den udløbsdato, der er trykt på folieposen.
4. Brug ikke sættet, hvis posen er punkteret eller ikke forsegleet orden ligt.
5. Opbevares utilgængeligt for børn.

OPBEVARING OG STABILITET

1. Opbevar mellem 4°C og 30°C i den forseglede foliepose indtil udløbsdato.
2. Holdes væk fra direkte sollys, fugt og varme.
3. FRYS IKKE.
4. Du skal udføre testen hurtigt efter åbning af posen. Du skal opbevare testen i et tørt miljø inden brug.

HVORNÅR SKAL URINPRØVEN INDSAMLES?


For mange kvinder kan HCG påvises med denne test fra dagen efter den udeblevne menstruation. Hver urinprøve er egnet til graviditetstest, men den første urinprøve om morgenen er optimal på grund af dens højeste koncentration af HCG.

HVORDAN INDSAMLES URINPRØVEN?

Urinprøver kan indsamles i ethvert rent, tørt, plastik eller glas bæger.

HVORDAN UDFØRES TESTEN?

1. Teststrimlen og urinen skal være omkring stuetemperatur til test.
2. Tag teststrimlen ud af den forseglede pose.
3. Dyp strimlen i urinen med pilen pegende imod urinen. Tag strimlen op efter 5 sekunder og læg strimlen fladt på en ren, tør, ikke absorberende overflade (f.eks. på kanten af opsamlingsbægeret).
VIGTIGT! Urinen må ikke overstige MAX-stregen (markørlinje), ellers vil testen ikke fungere korrekt.
4. Aflæs resultat inden 5 minutter. Nogle gange kan positive resultater forekomme så tidligt som efter 1 minut, men du skal vente de hele 5 minutter, før du aflæser et negativt resultat. Aflæs ikke resultatet efter mere end 5 minutter.

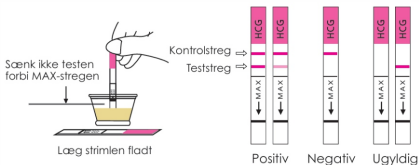

HVORDAN AFLÆSES RESULTATERNE?

Negativ (ikke gravid):

Kun en farvet streg i kontrolzonen vises. Ingen synlig streg i testzonen. Dette indikerer, at der ikke er tegn på graviditet.

Positiv (gravid):

Tydelige farvede streger vises i kontrol- og testzonen. Dette indikerer at du er gravid.

Ugyldig:

Ingen synlige streger overhovedet, eller der er kun en synlig streg i testzonen, og ikke i kontrolzonen. Gentag med en ny test.

BEMÆRK: Hvis farven i testzonen er svag, anbefales det, at testen gentages inden for 48 timer, eller hvis testen viser negativ, men du har mistanke om, at du er gravid, kan testen gentages efter et par dage.

HVAD SKAL MAN GØRE NÅR MAN KENDER RESULTATET?

HVIS RESULTATET ER POSITIVT (2 STREGER)

Kontakt din læge, som bør bekræfte din graviditet efter at have evalueret alle kliniske samt laboratorie resultater. Under visse omstændigheder kan testen give et falsk positivt resultat. Din læge vil også give dig yderligere information og rådgivning om din graviditet.

Se også "FORSTÅ TESTRESULTATET".

HVIS RESULTATET ER NEGATIVT (1 STREG)

Hvis du stadig mener der er chance for du er gravid (f.eks. ved stadig udebleven menstruation), kan du tage en ny test et par dage senere. Hvis testen stadig er negativ, så kontakt din læge. Se også "FORSTÅ TESTRESULTATET".

FORSTÅ TESTRESULTATET

1. Hvis en urinprøve er for fortyndet, indeholder den muligvis ikke et repræsentativt niveau af hCG. Hvis der stadig er mistanke om graviditet, skal en anden urinprøve indsamles 48 timer senere og testes.
2. Lav koncentration af hCG i en meget tidlig graviditet kan give et negativt resultat. I dette tilfælde skal en ny prøve indsamles mindst 48 timer senere og testes.
3. Enhver behandling med hCG kan forårsage falske resultater.

FORVENTEDE RESULTATER

Selvom tidlige hCG-niveauer hos normale gravide er varierende, viser denne HCG-test det mest præcise resultat første dag efter udebleven menstruation.

SPØRGSMÅL OG SVAR

1. Der er stor forskel mellem kontrolstregerne i to tests. Er dette noget at bekymre sig om?
Nej, forskellen på farven på kontrolstregen har ingen betydning for resultatet.
2. Kan testresultater aflæses efter mere end 5 minutter?
Nej. Testresultaterne skal læses inden for 5 minutter. Et negativt resultat kan ændres til et falsk positivt inden for få minutter efter aflæsningstiden og er derefter ikke længere et korrekt resultat. Det er altid bedst at aflæse resultatet inden der er gået 5 minutter og derefter kassere testen for at undgå forvirring.

YDELSESEGENSKABER

Følsomhed:

One Step Graviditetstest strimmel har en følsomhed på 10 mIU/ml.

Forstyrrende stoffer:

Følgende potentielt forstyrrende stoffer blev tilsat til hCG-negative og positive prøver uden nogen forstyrrelse.

Acetaminophen, aspirin, ascorbinsyre, atropin, koffein, glukose, hæmoglobin, tetracyclin, ampicillin, albumin, bilirubin.

Stabilitet efter første åbning:

Resultaterne af åbnede pakker i stabilitetsundersøgelser viser, at produktkvaliteten var stabil og gyldig inden for 1,5 timer. I betragtning af de variationer i temperatur og fugtighed, der kan forekomme, foreslår vi, at du bruger testen umiddelbart efter åbning.

INDEKS OVER SYMBOLER

	Producent		Fremstillingsdato
	Europæisk repræsentant		Temperaturgrænse
	Udløbsdato		Må ikke genbruges
	Batchkode		Læs brugsanvisningen
	Advarsel		In vitro-diagnostik
	Indeholder tilstrækkeligt til <n> test		Katalognummer

Mere information på Babyplan.dk/smile

Les all informasjonen i dette vedlegget før du utfører testen. One Step Graviditetstest strimmel er en in-vitro hjemmetestingsenhet designet for rask bestemmelse av menneskelig choriogonadotropin (hCG) i urinen for å hjelpe deg med tidlig påvisning av graviditet. Lett å utføre selv. Beregnet for hjemmebruk. Kun for in-vitro diagnostisk bruk.

HVORDAN VIRKER TESTEN?

Human choriogonadotropin (hCG) er et hormon produsert av morkaken som utskilles i urin. Graviditetstesten inneholder antistoffer som spesifikt reagerer med dette hormonet. Når den absorberende ende av testen dyppes i urinprøven, vandrer urinen langs strimlen. Når hCG i prøven når membranen i testsonen, danner den en farget linje. Fravær av denne fargede linjen indikerer et negativt resultat. En farget linje vises i kontrollsonen hvis testen utføres riktig.

INNHALDET I TESTSETTET

1. En pose som inneholder en teststrimmel.
2. Bruksanvisning.

HVA MER TRENGER DU?

En ren, tørr, plast- eller glasskopp for å samle urin.
Timer eller klokke.

FORHOLDSREGLER

1. Dette settet er kun beregnet på eksternt bruk. Ikke svelg.
2. Kast det etter første gangs bruk. Teststrimmelen kan ikke brukes mer enn én gang.
3. Ikke bruk testen etter utløpsdatoen som er trykt på folieposen.
4. Ikke bruk settet hvis posen punkteres eller ikke er ordentlig forseglet.
5. Oppbevares utilgjengelig for barn.

LAGRING OG STABILITET

1. Oppbevares mellom 4 °C og 30 °C i den forseglede folieposen frem til utløpsdatoen.
2. Holdes unna direkte sollys, fuktighet og varme.
3. FRYS IKKE.
4. Du må utføre testen raskt etter at du har åpnet posen. Testen må være i tørre omgivelser før bruk.

NÅR SKAL URINPRØVEN SAMLES INN?


For mange kvinner kan HCG oppdages med denne testen fra dagen etter fraværet av menstruasjon. Hver urinprøve er egnet for graviditetstester, men den første urinprøven om morgenen er optimal på grunn av sin høyeste konsentrasjon av HCG.

HVORDAN SAMLE URINPRØVE?

Urinprøven kan samles i en hvilken som helst ren, tørr, plast- eller glasskopp.

HVORDAN UTFØRES TESTEN?

1. Teststrimmelen og urinen skal være rundt romtemperatur før testing.
2. Fjern teststrimmelen fra den forseglede posen.
3. Dypp stripen i urinen med pilen pekende imot urinen. Ta ut stripsen etter 5 sekunder og legg stripen flatt på en ren, tørr, ikke-absorberende overflate (f.eks. på kanten av oppsamlingskoppen).
Viktig! Ikke la urinnivået overstige MAX-linjen (markørlinjen), ellers vil ikke testen fungere som den skal.
4. Les resultatet innen 5 minutter. Ikke les resultatet etter mer enn 5 minutter.

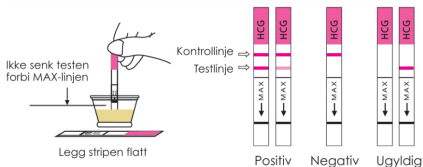

HVORDAN LESES RESULTATENE?

Negativ (ikke gravid):

Bare en farget linje i kontrollsonen vises. Ingen synlig linje i testsonen. Dette indikerer at det ikke er tegn til graviditet.

Positiv (gravid):

Klare fargede linjer vises i kontroll- og testsonen. Dette indikerer at du er gravid.

Ugyldig:

Ingen synlige linjer i det hele tatt, eller det er bare én synlig linje i testsonen, og ikke i kontrollsonen. Ta en ny test.

MERK: Hvis fargen i testsonen er svak, anbefales det at testen gjentas innen 48 timer, eller hvis testen viser negativ, men du mistenker at du er gravid, kan testen gjentas etter noen dager.

HVA SKAL DU GJØRE NÅR DU VET RESULTATET?

HVIS RESULTATET ER POSITIVT (2 STREKER)

Kontakt legen din, som bør bekrefte graviditeten din etter å ha evaluert alle kliniske så vel som laboratorieresultater. Under visse omstendigheter kan testen gi et falskt positivt resultat. Legen din vil også gi deg ytterligere informasjon og råd om graviditeten din.

Se også "FORSTÅ TESTRESULTATET".

HVIS RESULTATET ER NEGATIVT (1 STREK)

Hvis du fortsatt tror det er en sjanse for at du er gravid (f.eks. hvis du fortsatt har en fraværsperiode av menstruasjon), kan du ta en ny test noen dager senere. Hvis testen fortsatt er negativ, kontakt legen din.

Se også "FORSTÅ TESTRESULTATET".

FORSTÅ TESTRESULTATET

1. Hvis en urinprøve er for fortynnet, kan den ikke inneholde et representativt nivå av hCG. Hvis graviditet fortsatt mistenkes, bør en annen urinprøve samles 48 timer senere og testes.
2. Lav konsentrasjon av hCG i en svært tidlig graviditet kan gi et negativt resultat. I dette tilfellet må en ny prøve samles inn minst 48 timer senere og testes.

3. Enhver behandling med hCG kan forårsake falske resultater.

FORVENTEDE RESULTATER

Selv om tidlige hCG nivåer hos normale gravide kvinner er variabel, ser vi denne HCG testen som det mest nøyaktige resultatet den første dagen etter fravær av menstruasjon.

SPØRSMÅL OG SVAR

1. Det er stor forskjell mellom kontrollinjene i to tester. Er dette noe å bekymre seg for?
Nei, forskjellen i fargen på kontrollinjen har ingen innvirkning på resultatet.
2. Kan testresultatene leses etter mer enn 5 minutter?
Nei. Testresultatene må leses innen 5 minutter. Selv om et positivt resultat ikke endres innen flere dager, kan et negativt resultat endres til et falsk positivt svar minutter etter testperioden, som deretter vil gi en villedende test. Det er alltid best å lese resultatet på testtidspunktet på 5 minutter og deretter kaste testen for å unngå forvirring.

YTELSESEGENSKAPER

Følsomhet:

One Step Graviditetstest strimmel har en følsomhet på 10 mIU/ml.

Forstyrrende stoffer:

Følgende potensielt forstyrrende stoffer ble tilsatt til hCG-negative og positive prøver uten forstyrrelser.

Acetaminophen, aspirin, ascorbinsyre, atropin, koffein, glukose, hæmoglobin, tetracyclin, ampicillin, albumin, bilirubin.

Stabilitet etter åpning:

Resultatene fra åpnete pakker i stabilitetsstudier viser at produktkvaliteten var stabil og gyldig innen 1,5 timer. Gitt variasjonene i temperatur og fuktighet som kan oppstå, foreslår vi at du bruker testen umiddelbart etter åpning.

INDEKS OVER SYMBOLER

	Produsent		Produksjonsdato
	Europeisk representant		Temperaturgrense
	Utløpsdato		Må ikke gjenbrukes
	Batchkode		Les bruksanvisningen
	Advarsel		In vitro-diagnostikk
	Inneholder nok til <n> tester		Katalognummer

Mer informasjon på Babyplan.no/smile

Lue kaikki tämän pakkausselosteen tiedot ennen testin suorittamista.

One Step HCG -testiliuska on in vitro -diagnostiikkalaite kotikäyttöön, joka on tarkoitettu ihmisen oriongonadotropiinin (hCG) pitoisuuden nopeaan määrittämiseen virtsasta raskauden varhaisen havaitsemisen avuksi. Voit suorittaa testin helposti itse. Se on tarkoitettu itsetestaukseen.

Vain in vitro -diagnostiikkakäyttöön.

MITEN SE TOIMII?

Ihmisen koriongonadotropiini (hCG) on hormoni, jota kehittyvä istukka tuottaa ja joka erittyy virtsaan. Raskaustesti sisältää vasta-aineita, jotka reagoivat erityisesti tämän hormonin kanssa.

Kun testin näytteenottopää kastetaan virtsanäytteeseen, virtsanäyte tarttuu nauhaan ja kulkeutuu nauhaa pitkin.

Kun näytteen hCG saavuttaa kalvon testialueen, se muodostaa värillisen viivan. Tämän värillisen viivan puuttuminen viittaa negatiiviseen tulokseen.

Jos testi on suoritettu oikein, kontrollialueelle ilmestyy värillinen viiva.

TESTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1. Yksi pussi, joka sisältää reaktioliuskan.
2. Käyttöohjeet sisältävä esite.

MITÄ MUUTA TARVITSET?

Puhdas, kuiva muovi- tai lasiastia virtsan keräämistä varten. Ajastin tai kello.

VAROTOIMET

1. Tämä pakkaus on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön. Älä niele.
2. Hävitä ensimmäisen käytön jälkeen. Testiliuskaa ei voi käyttää useammin kuin kerran.
3. Älä käytä testiä folio-pussiin painetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
4. Älä käytä pakkausta, jos pussi on puhkaistu tai ei ole kunnolla suljettu.
5. Säilytä lasten ulottumattomissa.

SÄILYTYS JA STABILITEETTI

1. Säilytä 4–30 °C:ssa suljetussa pussissa viimeiseen käyttöpäivään asti.
2. Suojaa suoralta auringonvalolta, kosteudelta ja lämmöltä.
3. ÄLÄ JÄÄDYTTÄ.
4. Testi on suoritettava pian pussin avaamisen jälkeen. Testi on säilytettävä kuivassa ympäristössä ennen käyttöä.

MILLOIN VIRTSA PITÄÄ OTTAA TESTIÄ VARTEN?


Monilla naisilla HCG voi olla havaittavissa tällä testillä jo seuraavana päivänä kuukautisten myöhästymisen jälkeen. Mikä tahansa virtsanäyte sopii raskaustestiin, mutta ensimmäisen aamun virtsanäyte on optimaalinen, koska sen HCG-pitoisuus on korkein.

MITEN VIRTSA KERÄTÄÄN?

Virtsanäytteet voidaan kerätä mihin tahansa puhtaaseen, kuivaan muov- tai lasiastiaan.

MITEN TESTAUS TEHDÄÄN?

1. Testiliuska ja virtsa on oltava huoneenlämpöisiä testausta varten.
2. Poista testiliuska suljetusta pussista.
3. Kasta liuska virtsaan nuolen osoittaessa virtsaa kohti. Ota liuska pois 5 sekunnin kuluttua ja aseta se tasaiselle, puhtaalle, kuivalle ja imemättömälle pinnalle (kuten virtsasäiliön suulle).
TÄRKEÄÄ: Älä anna virtsan tason ylittää MAX-merkkiä (merkintäviiva), muuten testi ei toimi oikein.
4. Lue tulokset viiden minuutin kuluttua. Positiiviset tulokset voivat joskus näkyä jo minuutin kuluttua, mutta sinun tulee odottaa täysiä 5 minuuttia ennen kuin voit määrittää negatiivisen tuloksen. Älä lue tuloksia yli 5 minuutin kuluttua.

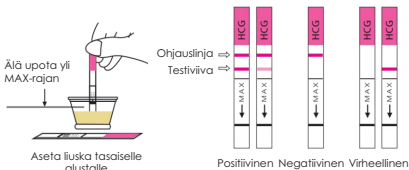

MITEN TULOKSET LUETAAN?

Negatiivinen (ei raskaana):

Vain yksi värikaistale näkyy kontrollialueella. Testialueella ei näy kaistaleita. Tämä osoittaa, että raskautta ei ole havaittu.

Positiivinen (raskaana):

Kontrolli- ja testialueilla näkyy selkeitä värikaistaleita. Tämä osoittaa, että olet raskaana.

Virheellinen:

Ei lainkaan näkyvää raitaa tai näkyvä raita on vain testialueella eikä kontrollialueella. Toista testi uudella testipakkauksella.

HUOMAUTUS: Jos testialueen väri on heikko, testi on suositeltavaa toistaa 48 tunnin kuluttua, tai jos testi on negatiivinen, mutta Jos epäilet, että olet edelleen raskaana, testi voidaan toistaa muutaman päivän kuluttua.

MITÄ TEHDÄ, KUN TULOS ON TIEDOSSA

JOS TULOS ON POSITIIVINEN (KAKSI VIVVAA)

Ota yhteyttä lääkäriisi. Lääkäri vahvistaa raskautesi arvioituaan kaikki kliniset ja laboratoriotulokset. Joissakin harvinaisissa tapauksissa testi voi antaa väärän positiivisen tuloksen. Lääkäri antaa sinulle myös lisätietoja ja neuvoja raskaudestasi. Katso myös "Testitulosten ymmärtäminen".

JOS TULOS ON NEGATIIVINEN (YKSI VIVVA)

Jos sinulla on syytä uskoa olevasi raskaana (esim. kuukautiset ovat jääneet pois), voit toistaa testin muutaman päivän kuluttua. Jos testi on edelleen negatiivinen, ota yhteyttä lääkäriisi. Katso myös "Testitulosten tulkinta".

TESTITULOSEN YMMÄRTÄMINEN

1. Jos virtsanäyte on liian laimennettu, se ei välttämättä sisällä edustavaa määrää hCG-hormonia. Jos raskaus epäillään edelleen, uusi virtsanäyte tulisi ottaa 48 tuntia myöhemmin ja testata.
2. Alhainen hCG-pitoisuus raskauden alkuvaiheessa voi antaa negatiivisen tuloksen. Tällöin on otettava uusi näyte vähintään 48 tuntia myöhemmin ja testattava se.
3. Kaikki hCG-hoidot voivat aiheuttaa vääriä tuloksia.

ODOTETUT TULOKSET

Vaikka normaalisti raskaana olevien naisten varhaiset hCG-tasot vaihtelevat, tämä HCG-testi antaa tarkimmat tulokset ensimmäisenä päivänä kuukautisten myöhästymisen jälkeen.

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

1. Kahden testin kontrolliviivoissa on suuri ero. Onko tämä huolestuttavaa?
Ei. Kontrolliviivan värin vaihtelut eivät vaikuta testitulokseen.
2. Voiko testituloksia tulkita yli viiden minuutin kuluttua?
Ei. Testitulokset on luettava 5 minuutin kuluttua. Negatiivinen tulos voi muuttua vääräksi positiiviseksi muutaman minuutin kuluttua testausajan päättymisestä, jolloin tulos ei ole tarkka. On aina parasta lukea tulokset 5 minuutin kuluttua testausajasta ja hävittää testi sen jälkeen sekaannusten välttämiseksi.

SUORITUSKYKY

Herkkyys:

One Step HCG -testin herkkyys on 10 mIU/ml.

Häiritsevät aineet:

Seuraavat mahdollisesti häiritsevät aineet lisättiin hCG-negatiivisiin ja positiivisiin näytteisiin, eikä häiriötä havaittu. Asetaminofeeni, aspiriini, askorbiinihappo, atropiini, kofeiini, glukoosi, hemoglobiini, tetrasykliini, ampisilliini, albumiini, bilirubiini.

Stabiilius ensimmäisen avaamisen jälkeen:
 Paketin avaamisen jälkeisten stabiiliisuustutkimusten tulokset osoittavat, että tuotteen laatu oli stabiili ja voimassa 1,5 tunnin ajan. Koska lämpötila ja kosteus voivat vaihdella, suosittelemme käyttämään testin heti avaamisen jälkeen.

SYMBOLIEN HAKEMISTO

	Valmistaja		Valmistuspäivä
	Eurooppalainen edustaja		Lämpötilaraja
	Käyttöpäivämäärä		Älä käytä uudelleen
	Eräkoodi		Katso ohjeet
	Varoitus		In vitro - diagnostiikka
	Sisältää riittävästi <n> testiä varten		Tuotenumero

Lisätietoja osoitteessa [Babyplan.com/smile](https://www.babyplan.com/smile)

Bitte lesen Sie alle Informationen in dieser Packungsbeilage, bevor Sie den Test durchführen.

Der One Step HCG Teststreifen ist ein In-vitro-Diagnostikum für den Heimgebrauch, das zur schnellen Bestimmung von humanem Choriongonadotropin (hCG) im Urin dient, um die Früherkennung einer Schwangerschaft zu unterstützen. Sie können den Test ganz einfach selbst durchführen.

Er ist für die Selbstanwendung bestimmt.

Nur für die In-vitro-Diagnostik.

WIE FUNKTIONIERT ER?

Humanes Choriongonadotropin (hCG) ist ein Hormon, das von der sich entwickelnden Plazenta produziert und in den Urin ausgeschieden wird. Der Schwangerschaftstest enthält Antikörper, die spezifisch mit diesem Hormon reagieren.

Wenn das Probenende des Tests in die Urinprobe getaucht wird, wird die Urinprobe auf den Streifen aufgetragen und wandert entlang des Streifens.

Wenn das hCG in der Probe den Testbereich der Membran erreicht, bildet sich eine farbige Linie. Das Fehlen dieser farbigen Linie deutet auf ein negatives Ergebnis hin.

Wenn der Test ordnungsgemäß durchgeführt wurde, erscheint im Kontrollbereich eine farbige Linie.

INHALT DES TESTKITS

1. Ein Beutel mit einem Reaktionsstreifen.
2. Beipackzettel mit Gebrauchsanweisung.

WAS BENÖTIGEN SIE SONST NOCH?

Einen sauberen, trockenen Kunststoff- oder Glasbehälter zum Auffangen des Urins.

Eine Stoppuhr oder Uhr.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Dieses Kit ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Nicht schlucken.
2. Nach dem ersten Gebrauch entsorgen. Der Teststreifen kann nur einmal verwendet werden.
3. Verwenden Sie den Test nicht nach Ablauf des auf der Folienverpackung aufgedruckten Verfallsdatums.

4. Verwenden Sie das Kit nicht, wenn die Verpackung beschädigt oder nicht ordnungsgemäß verschlossen ist.
5. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

1. Bei 4 °C bis 30 °C im verschlossenen Beutel bis zum Verfallsdatum lagern.
2. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Hitze schützen.
3. NICHT EINFRIEREN.
4. Der Test sollte kurz nach dem Öffnen des Beutels durchgeführt werden. Der Test sollte vor der Verwendung in einer trockenen Umgebung aufbewahrt werden.

WANN SOLLTE DER URIN FÜR DEN TEST ENTNOMMEN WERDEN?

Bei vielen Frauen kann HCG mit diesem Test bereits am Tag nach Ausbleiben der Periode nachgewiesen werden. Jede Urinprobe ist für den Schwangerschaftstest geeignet, jedoch ist die erste Morgenurinprobe aufgrund ihrer höchsten HCG-Konzentration optimal.

WIE SAMMELT MAN URIN?


Urinproben können in jedem sauberen, trockenen Kunststoff- oder Glasbehälter gesammelt werden.

WIE WIRD DER TEST DURCHGEFÜHRT?

1. Der Teststreifen und der Urin müssen für den Test Raumtemperatur haben.
2. Nehmen Sie den Teststreifen aus der versiegelten Verpackung.
3. Tauchen Sie den Teststreifen mit dem Pfeil in Richtung Urin in den Urin. Nehmen Sie den Teststreifen nach 5 Sekunden heraus und legen Sie ihn flach auf eine saubere, trockene, nicht saugfähige Oberfläche (z. B. den Rand des Urinbehälters).

WICHTIG: Der Urinstand darf die MAX-Markierung nicht überschreiten (Markierungslinie), da der Test sonst nicht korrekt durchgeführt werden kann.

4. Lesen Sie die Ergebnisse nach fünf Minuten ab. Positive Ergebnisse können manchmal bereits nach einer Minute sichtbar sein, aber Sie sollten die vollen 5 Minuten abwarten, bevor Sie ein negatives Ergebnis feststellen. Lesen Sie die Ergebnisse nicht nach mehr als 5 Minuten ab.

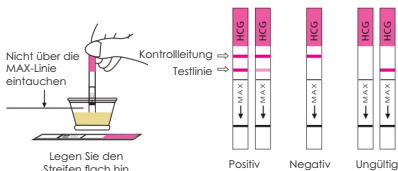

WIE LESEN SIE DIE ERGEBNISSE AB?

Negativ (nicht schwanger):

Es erscheint nur ein Farbstreifen in der Kontrollzone. Kein sichtbarer Streifen in der Testzone. Dies bedeutet, dass keine Schwangerschaft festgestellt wurde.

Positiv (schwanger):

In der Kontroll- und Testzone erscheinen deutliche Farbbänder. Dies bedeutet, dass Sie schwanger sind.

Ungültig:

Es ist überhaupt kein Streifen sichtbar oder es ist nur im Testbereich ein Streifen sichtbar, nicht jedoch im Kontrollbereich. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Testkit.

HINWEIS: Wenn die Farbe in der Testzone schwach ist, wird empfohlen, den Test nach 48 Stunden zu wiederholen, oder wenn der Test negativ ausfällt, Sie jedoch vermuten, dass Sie dennoch schwanger sein könnten, kann der Test nach einigen Tagen wiederholt werden.

WAS IST ZU TUN, WENN SIE DAS ERGEBNIS KENNEN

WENN DAS ERGEBNIS POSITIV IST (ZWEI STREICHEN)

Konsultieren Sie Ihren Arzt. Er oder sie sollte Ihre Schwangerschaft nach Auswertung aller klinischen und Laborbefunde bestätigen. In seltenen Fällen kann der Test ein falsch positives Ergebnis liefern. Ihr Arzt wird Ihnen auch weitere Informationen und Ratschläge zu Ihrer Schwangerschaft geben. Siehe auch „Testergebnisse verstehen“.

WENN DAS ERGEBNIS NEGATIV IST (EINE LINIE)

Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass Sie schwanger sind (z. B. keine Menstruationsblutung), können Sie den Test einige Tage später wiederholen. Wenn der Test weiterhin negativ ist, konsultieren Sie Ihren Arzt. Siehe auch „Testergebnisse verstehen“.

TESTERGEBNISSE VERSTEHEN

1. Wenn eine Urinprobe zu verdünnt ist, enthält sie möglicherweise keinen repräsentativen hCG-Wert. Bei weiterhin bestehendem Verdacht auf eine Schwangerschaft sollte 48 Stunden später eine weitere Urinprobe entnommen und getestet werden.
2. Eine niedrige hCG-Konzentration in einer sehr frühen Schwangerschaft kann zu einem negativen Ergebnis führen. In diesem Fall sollte mindestens 48 Stunden später eine weitere Probe entnommen und getestet werden.
3. Jede Behandlung mit hCG kann zu falschen Ergebnissen führen.

ERWARTETE ERGEBNISSE

Obwohl die frühen hCG-Werte bei normal schwangeren Frauen variieren, liefert dieser hCG-Test am ersten Tag nach Ausbleiben der Periode die genauesten Ergebnisse.

FRAGEN & ANTWORTEN

1. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den Kontrolllinien der beiden Tests. Ist das ein Grund zur Sorge?
Nein. Abweichungen in der Farbe des Kontrollstreifens haben keinen Einfluss auf das Testergebnis.
2. Können die Testergebnisse nach mehr als fünf Minuten ausgewertet werden?
Nein. Die Testergebnisse müssen innerhalb von 5 Minuten abgelesen werden. Ein negatives Ergebnis kann sich innerhalb weniger Minuten nach Ablauf der Testdauer in ein falsch positives Ergebnis ändern, was keine genaue Messung mehr wäre. Es ist immer am besten, die Ergebnisse nach Ablauf der 5minütigen Testdauer abzulesen und den Test anschließend zu entsorgen, um Verwechslungen zu vermeiden.

LEISTUNGSMERKMALE

Empfindlichkeit:

Der One Step HCG-Test hat eine Empfindlichkeit von 10 mIU/ml.

Störende Substanzen:

Die folgenden potenziell störenden Substanzen wurden hCG-negativen und positiven Proben zugesetzt, es wurden keine Störungen beobachtet.

Acetaminophen, Aspirin, Ascorbinsäure, Atropin, Koffein, Glukose, Hämoglobin, Tetracyclin, Ampicillin, Albumin, Bilirubin.

Stabilität nach dem ersten Öffnen:

Die Ergebnisse der Stabilitätsstudien nach dem Öffnen der Verpackung zeigen, dass die Produktqualität innerhalb von 1,5 Stunden stabil und gültig war. Angesichts möglicher Schwankungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit empfehlen wir, den Test sofort nach dem Öffnen durchzuführen.

SYMBOLVERZEICHNIS

	Hersteller		Herstellungsdatum
	Europäischer Vertreter		Temperaturgrenze
	Verfallsdatum		Nicht wiederverwenden
	Chargencode		Anweisungen beachten
	Vorsicht		In-vitro-Diagnostikum
	Enthält ausreichend für <n> Tests		Katalognummer

Weitere Informationen finden Sie unter Babyplan.com/smile

Lees alle informatie in deze bijsluiter voordat u de test uitvoert. One Step HCG Teststrip is een in-vitro diagnostisch testapparaat voor thuisgebruik dat bedoeld is voor de snelle bepaling van humaan choriongonadotrofine (hCG) in urine om te helpen bij de vroege detectie van zwangerschap. U kunt de test eenvoudig zelf uitvoeren.

Het is bedoeld voor zelftesten.

Alleen voor in-vitrodiagnostiek.

HOE WERKT HET?

Humaan choriongonadotrofine (hCG) is een hormoon dat wordt geproduceerd door de die zich ontwikkelt in de placenta en wordt uitgescheiden in de urine. De zwangerschapstest bevat antilichamen die specifiek reageren op dit hormoon.

Wanneer het uiteinde van de test in het urinemonster wordt gedompeld, wordt het urinemonster op de strip aangebracht en migreert het langs de strip.

Wanneer hCG in het monster het testgebied van het membraan bereikt, vormt zich een gekleurde lijn. Als deze gekleurde lijn ontbreekt, wijst dit op een negatief resultaat.

Als de test correct is uitgevoerd, verschijnt er een gekleurde lijn in het controlegebied.

INHOUD VAN DE TESTKIT

1. Eén zakje met een reactiestrip.
2. Bijsluiter met gebruiksaanwijzing.

WAT HEBT U NOG MEER NODIG?

Een schone, droge plastic of glazen container om de urine op te vangen.

Timer of klok.

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Deze kit is uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik. Niet inslikken.
2. Na eerste gebruik weggooien. De teststrip kan niet meer dan één keer worden gebruikt.
3. Gebruik de test niet na de vervaldatum die op het foliezakje staat vermeld.

4. Gebruik de kit niet als het zakje is doorboord of niet goed is afgesloten.
5. Buiten bereik van kinderen bewaren.

BEWARING EN STABILITEIT

1. Bewaar bij 4 °C tot 30 °C in het verzegelde zakje tot de vervaldatum.
2. Vermijd direct zonlicht, vocht en warmte.
3. NIET INVRIEZEN.
4. Voer de test uit kort nadat u het zakje hebt geopend.
Bewaar de test voor gebruik in een droge omgeving.

WANNEER MOET U URINE VERZAMELEN VOOR DE TEST?


Bij veel vrouwen kan HCG met deze test al op de dag na het uitblijven van de menstruatie worden aangetoond. Elk urinemonster is geschikt voor een zwangerschapstest, maar het eerste ochtendurine is het meest geschikt vanwege de hoogste concentratie HCG.

HOE VERZAMEL JE URINE??

Urinemonsters kunnen worden verzameld in een schone, droge plastic of glazen container.

HOE DE TEST UITVOEREN?

1. De teststrip en de urine moeten op kamertemperatuur zijn voor het testen.
2. Haal de teststrip uit het verzegelde zakje.
3. Dompel de strip onder in de urine met de pijl in de richting van de urine. Haal de strip na 5 seconden uit de urine en leg de strip plat op een schoon, droog, niet-absorberend oppervlak (zoals de opening van het urinepotje).
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat het urineniveau niet boven de MAX (markeringslijn), anders werkt de test niet goed.
4. Lesen Sie die Ergebnisse nach fünf Minuten ab. Lees de resultaten na vijf minuten af. Positieve resultaten kunnen soms al na één minuut zichtbaar zijn, maar u moet de volledige 5 minuten wachten voordat u een negatief resultaat vaststelt. Lees de resultaten niet af na meer dan 5 minuten.

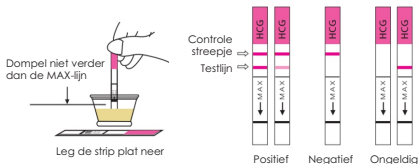

HOE LEES JE DE RESULTATEN?

Negatief (niet zwanger):

Er verschijnt slechts één kleurband, in de controlezone. Er is geen duidelijke band zichtbaar in de testzone. Dit geeft aan dat er geen zwangerschap is vastgesteld.

Positief (zwanger):

Er verschijnen duidelijke kleurbanden in de controle- en testzone. Dit geeft aan dat u zwanger bent.

Ongeldig:

Er is helemaal geen band zichtbaar, of er is alleen een band zichtbaar in het testgebied en niet in het controlegebied. Herhaal de test met een nieuwe testkit.

OPMERKING: Als de kleur in de testzone zwak is, wordt aanbevolen om de test na 48 uur te herhalen, of als de test negatief is maar u Als u vermoedt dat u nog steeds zwanger bent, kan de test na een paar dagen worden herhaald.

WAT MOET U DOEN ALS U HET RESULTAAT WEET

ALS HET RESULTAAT POSITIEF IS (TWEELIJNEN)

Raadpleeg uw arts. Hij of zij moet uw zwangerschap bevestigen na evaluatie van alle klinische en laboratoriumbevindingen. In sommige zeldzame gevallen kan de test een vals-positief resultaat geven. Hij of zij zal u ook meer informatie en advies geven over uw zwangerschap. Zie ook 'De testresultaten begrijpen'.

ALS DE UITSLAG NEGATIEF IS (ÉÉN STREEPJE)

Als u redenen hebt om aan te nemen dat u zwanger bent (bijv. geen menstruatiebloeding). U kunt de test een paar dagen later herhalen. Als de test nog steeds negatief is, raadpleeg dan uw arts.

Zie ook 'De testresultaten begrijpen'.

TESTRESULTATEN BEGRIJPEN

1. Als een urinemonster te verdund is, bevat het mogelijk geen representatief hCG-gehalte. Als u nog steeds vermoedt dat u zwanger bent, moet u 48 uur later een nieuw urinemonster afnemen en testen.
2. Een lage concentratie hCG in een zeer vroege zwangerschap kan een negatief resultaat opleveren. In dat geval moet ten minste 48 uur later een nieuw monster worden afgenomen en getest.
3. Elke behandeling met hCG kan valse resultaten veroorzaken.

VERWACHTE RESULTATEN

Hoewel de vroege hCG-waarden bij normale zwangere vrouwen variëren, geeft deze hCG-test de meest nauwkeurige resultaten op de eerste dag na het uitblijven van de menstruatie.

Vragen & Antwoorden

1. Er is een groot verschil tussen de controlelijnen van twee tests. Is dit een reden tot bezorgdheid?
Nee. Variaties in de kleur van de controleband hebben geen invloed op het testresultaat.
2. Kunnen testresultaten na meer dan vijf minuten worden geïnterpreteerd?
Nee. De testresultaten moeten binnen 5 minuten worden afgelezen. Een negatief resultaat kan binnen enkele minuten na afloop van de testperiode veranderen in een vals-positief resultaat, wat geen nauwkeurige meting zou zijn. Het is altijd het beste om de resultaten na 5 minuten af te lezen en de test vervolgens weg te gooien om verwarring te voorkomen.

PRESTATIEKENMERKEN

Gevoeligheid:

De One Step HCG-test heeft een gevoeligheid van 10 mIU/ml.

Storende stoffen:

De volgende potentieel storende stoffen werden toegevoegd aan hCGnegatieve en -positieve monsters, maar er werden geen storingen waargenomen.

Acetaminophen, aspirine, ascorbinezuur, atropine, cafeïne, glucose, hemoglobine, tetracycline, ampicilline, albumine, bilirubine.

Stabiliteit na eerste opening:

De resultaten van de stabiliteitsonderzoeken na opening van de verpakking tonen aan dat de kwaliteit van de producten binnen 1,5 uur stabiel en geldig was. Gezien de variaties in temperatuur en vochtigheid die kunnen optreden, raden wij aan de test onmiddellijk na opening te gebruiken.

INDEX VAN SYMBOLEN

	Fabrikant		Productiedatum
	Europese vertegenwoordiger		Temperatuurlimiet
	Houdbaarheidsdatum		Niet hergebruiken
	Partijcode		Raadpleeg de instructies
	Voorzichtig		In-vitrodiagnostiek
	Bevat voldoende voor <n> tests		Catalogusnummer

Meer informatie op Babyplan.com/smile

Veuillez lire toutes les informations contenues dans cette notice avant d'effectuer le test.

La bandelette de test One Step HCG est un dispositif de test diagnostique in vitro à usage domestique destiné à la détermination rapide de la gonadotrophine chorionique humaine (hCG) dans l'urine afin de faciliter la détection précoce d'une grossesse. Vous pouvez facilement le réaliser vous-même.

Il est destiné à être utilisé pour l'autotest.

À usage diagnostique in vitro uniquement.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Si la légonadotrophine chorionique humaine (hCG) est une hormone produite par se développant dans le placenta et sécrétée dans l'urine. Le test de grossesse contient des anticorps qui réagissent spécifiquement avec cette hormone.

Lorsque l'extrémité du test est plongée dans l'échantillon d'urine, celui-ci est appliqué sur la bandelette et migre le long de celle-ci.

Lorsque l'hCG présente dans l'échantillon atteint la zone de test de la membrane, une ligne colorée apparaît. L'absence de cette ligne colorée indique un résultat négatif.

Une ligne colorée apparaîtra dans la zone de contrôle si le test a été effectué correctement.

CONTENU DU KIT DE TEST

1. Un sachet contenant une bandelette réactive.
2. Une notice avec le mode d'emploi.

DE QUOI D'AUTRE AVEZ-VOUS BESOIN ?

Un récipient propre et sec, en plastique ou en verre, pour recueillir l'urine.

Un minuteur ou une horloge.

PRÉCAUTIONS

1. Ce kit est destiné à un usage externe uniquement. Ne pas avaler.
2. Jeter après la première utilisation. La bandelette réactive ne peut être utilisée qu'une seule fois.
3. Ne pas utiliser le test après la date de péremption imprimée sur le sachet en aluminium.

4. Ne pas utiliser le kit si le sachet est perforé ou mal scellé.
5. Tenir hors de portée des enfants.

CONSERVATION ET STABILITÉ

1. Conserver entre 4 °C et 30 °C dans le sachet scellé jusqu'à la date de péremption.
2. Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, de l'humidité et de la chaleur.
3. NE PAS CONGELER.
4. Vous devez effectuer le test peu après l'ouverture du sachet. Vous devez conserver le test dans un environnement sec avant utilisation.

QUAND PRÉLEVER L'URINE POUR LE TEST?

Pour de nombreuses femmes, l'HCG peut être détectable à l'aide de ce test dès le lendemain du retard de règles. Tout échantillon d'urine convient pour le test de grossesse, mais l'échantillon d'urine du matin est optimal en raison de sa concentration plus élevée en HCG.

COMMENT PRÉLEVER L'URINE ?

Les échantillons d'urine peuvent être prélevés dans n'importe quel récipient propre et sec, en plastique ou en verre.

COMMENT EFFECTUER LE TEST ?

1. La bandelette réactive et l'urine doivent être à température ambiante pour le test.
2. Retirez la bandelette réactive de son emballage scellé.
3. Plongez la bandelette dans l'urine, la flèche pointant vers l'urine. Retirez la bandelette après 5 secondes et posez-la à plat sur une surface propre, sèche et non absorbante (comme l'ouverture du récipient contenant l'urine).
IMPORTANT : ne laissez pas le niveau d'urine dépasser la ligne MAX (ligne de repère), sinon le test ne fonctionnera pas correctement.
4. Lisez les résultats au bout de cinq minutes. Les résultats positifs peuvent parfois apparaître dès la première minute, mais vous devez attendre les cinq minutes complètes avant de déterminer un résultat négatif. Ne lisez pas les résultats après plus de cinq minutes.

Ne pas immerger
au delà de la
ligne MAX



Poser la bandelette à plat

Ligne de
contrôle →
Ligne de
test →



Positif



Négatif



Non valide

COMMENT INTERPRÉTER LES RÉSULTATS?

Négatif (pas enceinte) :

Une seule bande colorée apparaît dans la zone de contrôle. Aucune bande apparente dans la zone de test. Cela indique qu'aucune grossesse n'a été détectée.

Positif (enceinte) :

Des bandes de couleur distinctes apparaissent dans les zones de contrôle et de test. Cela indique que vous êtes enceinte.

Non valide :

Aucune bande visible, ou présence d'une bande visible uniquement dans la zone de test et non dans la zone de contrôle. Répétez le test avec un nouveau kit.

REMARQUE : si la couleur dans la zone de test est faible, il est recommandé de répéter le test dans les 48 heures, ou si le test est négatif mais que vous. Si vous pensez être encore enceinte, le test peut être répété après quelques jours.

QUE FAIRE LORSQUE VOUS CONNAISSEZ LE RÉSULTAT

SI LE RÉSULTAT EST POSITIF (DEUX LIGNES)

Consultez votre médecin. Il ou elle devra confirmer votre grossesse après avoir évalué tous les résultats cliniques et de laboratoire. Dans certains cas rares, le test peut donner un résultat faussement positif. Il ou elle vous donnera également de plus amples informations et des conseils sur votre grossesse.

Voir également « Comprendre les résultats du test ».

SI LE RÉSULTAT EST NÉGATIF (UNE LIGNE)

Si vous avez des raisons de croire que vous êtes enceinte (par exemple, absence de règles les saignements menstruels). Vous pouvez répéter le test quelques jours plus tard. Si le test est toujours négatif, consultez votre médecin.

Voir également « Comprendre les résultats du test ».

COMPRENDRE LES RÉSULTATS DU TEST

1. Si un échantillon d'urine est trop dilué, il peut ne pas contenir un taux représentatif d'hCG. Si vous soupçonnez toujours une grossesse, un autre échantillon d'urine doit être prélevé 48 heures plus tard et testé.
2. Une faible concentration d'hCG en début de grossesse peut donner un résultat négatif. Dans ce cas, un autre échantillon doit être prélevé au moins 48 heures plus tard et testé.
3. Tout traitement à base d'hCG peut fausser les résultats.

RÉSULTATS ATTENDUS

Bien que les taux précoces d'hCG chez les femmes enceintes normales varient, ce test HCG donne les résultats les plus précis le premier jour après un retard de règles.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. Il existe une grande différence entre les lignes de contrôle des deux tests. Est-ce préoccupant ?
Non. Les variations de couleur de la bande de contrôle n'ont aucune incidence sur le résultat du test.
2. Les résultats du test peuvent-ils être interprétés après plus de cinq minutes ?
Non. Les résultats du test doivent être lus dans les 5 minutes. Un résultat négatif peut se transformer en faux positif quelques minutes après la fin de la période de test, ce qui ne serait pas une lecture précise. Il est toujours préférable de lire les résultats à la fin de la période de test de 5 minutes, puis de jeter le test pour éviter toute confusion.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Sensibilité :

Le test One Step HCG a une sensibilité de 10 mIU/ml.

Substances interférentes :

Les substances suivantes, susceptibles d'interférer, ont été ajoutées à des échantillons hCG négatifs et positifs, sans qu'aucune interférence ne soit observée.

Acétaminophène, aspirine, acide ascorbique, atropine, caféine, glucose, hémoglobine, tétracycline, ampicilline, albumine, bilirubine.

Stabilité après la première ouverture :

Les résultats des études de stabilité après ouverture de l'emballage montrent que la qualité des produits est stable et valide pendant 1,5 heure. Compte tenu des variations de température et d'humidité qui peuvent survenir, nous recommandons d'utiliser le test immédiatement après ouverture.

INDEX DES SYMBOLES

	Fabricant		Date de fabrication
	Représentant européen		Limite de température
	Date limite d'utilisation		Ne pas réutiliser
	Code de lot		Consulter les instructions
	Attention		Diagnostic in vitro
	Contient suffisamment pour <n> tests		Numéro de catalogue

Plus d'informations sur [Babyplan.com/smile](https://www.babyplan.com/smile)

Leggere tutte le informazioni contenute in questo foglietto illustrativo prima di eseguire il test.

One Step HCG Test Strip è un dispositivo diagnostico in vitro per uso domesticodestinato alla determinazione rapida della gonadotropina corionica umana(hCG) nelle urine per facilitare la diagnosi precoce della gravidanza. Può esserefacilmente eseguito da sé.

È destinato all'uso per l'autodiagnosi.

Solo per uso diagnostico in vitro.

COME FUNZIONA?

La gonadotropina corionica umana (hCG) è un ormone prodotto dalla placentain via di sviluppo e secreto nelle urine. Il test di gravidanza contiene anticorpi che reagiscono specificamente con questo ormone.

Quando l'estremità del test viene immersa nel campione di urina, quest'ultimo viene applicato alla striscia e migra lungo di essa.

Quando l'hCG nel campione raggiunge la zona di test della membrana, formauna linea colorata. L'assenza di questa linea colorata indica un risultato negativo.

Se il test è stato eseguito correttamente, nella zona di controllo apparirà una linea colorata.

CONTENUTO DEL KIT DI ANALISI

1. Una bustina contenente una striscia reattiva.
2. Foglietto illustrativo con le istruzioni per l'uso.

COS'ALTRO È NECESSARIO?

Un contenitore pulito e asciutto, di plastica o vetro, per raccogliere l'urina.

Un timer o un orologio.

PRECAUZIONI

1. Questo kit è solo per uso esterno. Non ingerire.
2. Gettare dopo il primo utilizzo. La striscia reattiva non può essere utilizzata più di una volta.
3. Non utilizzare il test dopo la data di scadenza stampata sulla confezione in alluminio.
4. Non utilizzare il kit se la bustina è forata o non ben sigillata.

5. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

1. Conservare a una temperatura compresa tra 4 °C e 30 °C nella confezione sigillata fino alla data di scadenza.
2. Tenere lontano dalla luce solare diretta, dall'umidità e dal calore.
3. NON CONGELARE.
4. Il test deve essere eseguito subito dopo l'apertura della busta. Conservare il test in un ambiente asciutto prima dell'uso.

QUANDO RACCOLGERE L'URINA PER IL TEST?


Per molte donne, l'HCG può essere rilevabile con questo test il giorno dopo il mancato ciclo mestruale. Qualsiasi campione di urina è adatto per il test di gravidanza, ma il campione di urina del primo mattino è ottimale perché presenta la concentrazione più alta di HCG.

COME RACCOLGERE L'URINA?

I campioni di urina possono essere raccolti in qualsiasi contenitore pulito, asciutto, di plastica o di vetro.

COME ESEGUIRE IL TEST?

1. La striscia reattiva e l'urina devono essere a temperatura ambiente per il test.
2. Rimuovere la striscia reattiva dalla bustina sigillata.
3. Immergere la striscia nell'urina con la freccia rivolta verso l'urina. Estrarre la striscia dopo 5 secondi e appoggiarla su una superficie pulita, asciutta e non assorbente (ad esempio il bordo del contenitore dell'urina).
IMPORTANTE: non lasciare che il livello dell'urina superi il MAX (linea marcatrice), altrimenti il test non funzionerà correttamente.
4. Leggere i risultati dopo cinque minuti. I risultati positivi possono talvolta apparire già dopo un minuto, ma è necessario attendere i 5 minuti completi prima di determinare un risultato negativo. Non leggere i risultati dopo più di 5 minuti.

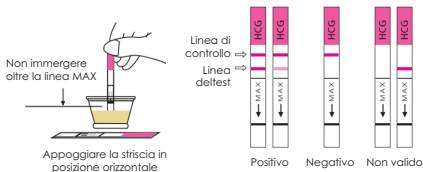

COME LEGGERE I RISULTATI?

Negativo (non incinta):

Appare solo una banda colorata nella zona di controllo.

Nessuna banda apparente nella zona di test. Ciò indica che non è stata rilevata alcuna gravidanza.

Positivo (gravidanza):

Nelle zone di controllo e di test compaiono bande di colore distinte. Ciò indica che sei incinta.

Non valido:

Nessuna banda visibile o presenza di una banda visibile solo nella zona del test e non nella zona di controllo. Ripetere il test con un nuovo kit.

NOTA: se il colore nella zona di test è debole, si consiglia di ripetere il test dopo 48 ore, oppure se il test risulta negativo ma si sospetti di essere ancora incinta, il test può essere ripetuto dopo alcuni giorni.

COSA FARE QUANDO CONOSCI IL RISULTATO

SE IL RISULTATO È POSITIVO (DUE LINEE)

Consultare il proprio medico. Il medico dovrà confermare la gravidanza dopo aver valutato tutti i risultati clinici e di laboratorio. In alcuni rari casi il test può dare un risultato falso positivo. Il medico fornirà inoltre ulteriori informazioni e consigli sulla gravidanza.

Vedi anche "Comprendere i risultati del test".

SE IL RISULTATO È NEGATIVO (UNA LINEA)

Se hai motivo di credere di essere incinta (ad esempio, assenza di sanguinamento mestruale), puoi ripetere il test dopo alcuni giorni. Se il test è ancora negativo, consulta il tuo medico. Vedi anche "Comprendere i risultati del test".

COMPRENDERE I RISULTATI DEL TEST

1. Se un campione di urina è troppo diluito, potrebbe non contenere un livello rappresentativo di hCG. Se si sospetta ancora una gravidanza, è necessario raccogliere un altro campione di urina 48 ore dopo ed eseguire il test.
2. Una bassa concentrazione di hCG in una gravidanza molto precoce può dare un risultato negativo. In questo caso, è necessario prelevare un altro campione almeno 48 ore dopo e sottoporlo a test.
3. Qualsiasi trattamento con hCG può causare risultati falsati.

RISULTATI PREVISTI

Sebbene i livelli iniziali di hCG nelle donne in gravidanza normale varino, questo test HCG mostra i risultati più accurati il primo giorno dopo un ritardo mestruale.

DOMANDE E RISPOSTE

1. C'è molta differenza tra le linee di controllo dei due test. È un problema?
No. Le variazioni di colore della banda di controllo non influenzano il risultato del test.
2. È possibile interpretare i risultati del test dopo più di cinque minuti?
No. I risultati del test devono essere letti entro 5 minuti. Un risultato negativo può trasformarsi in un falso positivo pochi minuti dopo la fine del periodo di test, il che non costituirebbe una lettura accurata. È sempre meglio leggere i risultati al termine del periodo di test di 5 minuti e poi gettare il test per evitare confusione.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Sensibilità:

Il test One Step HCG ha una sensibilità di 10 mIU/ml.

Sostanze interferenti:

Le seguenti sostanze potenzialmente interferenti sono state aggiunte a campioni hCG negativi e positivi, senza che fossero osservate interferenze.

Paracetamolo, aspirina, acido ascorbico, atropina, caffeina, glucosio, emoglobina, tetraciclina, ampicillina, albumina, bilirubina.

Stabilità dopo la prima apertura:

I risultati degli studi di stabilità dopo l'apertura della confezione dimostrano che la qualità del prodotto è rimasta stabile e valida per 1,5 ore. Date le variazioni di temperatura e umidità che possono verificarsi, si consiglia di utilizzare il test immediatamente dopo l'apertura.

INDICE DEI SIMBOLI

	Produttore		Data di produzione
	Rappresentante europeo		Limite di temperatura
	Data di scadenza		Non riutilizzare
	Codice lotto		Consultare le istruzioni
	Attenzione		Diagnostica in vitro
	Contiene una quantità sufficiente per <n> test		Numero di catalogo

Maggiori dettagli su Babyplan.com/smile

Lea toda la información de este prospecto antes de realizar la prueba.

La tira reactiva One Step HCG es un dispositivo de diagnóstico in vitro para uso doméstico destinado a la determinación rápida de la gonadotropina coriónica humana (hCG) en la orina para ayudar en la detección precoz del embarazo. Puede realizarla usted misma fácilmente.

Está destinada al uso en autodiagnóstico.

Solo para uso diagnóstico in vitro.

¿CÓMO FUNCIONA?

La gonadotropina coriónica humana (hCG) es una hormona producida por la placenta en desarrollo y secretada en la orina. La prueba de embarazo contiene anticuerpos que reaccionan específicamente con esta hormona.

Cuando se sumerge el extremo de la prueba en la muestra de orina, esta se aplica a la tira y migra a lo largo de la misma.

Cuando la hCG de la muestra alcanza la zona de prueba de la membrana, se forma una línea de color. La ausencia de esta línea de color sugiere un resultado negativo.

Si la prueba se ha realizado correctamente, aparecerá una línea de color en la zona de control.

CONTENIDO DEL KIT DE PRUEBA

1. Una bolsa que contiene una tira reactiva.
2. Folleto con instrucciones de uso.

¿QUÉ MÁS SE NECESITA?

Un recipiente limpio y seco, de plástico o vidrio, para recoger la orina.

Un cronómetro o un reloj.

PRECAUCIONES

1. Este kit es solo para uso externo. No ingerir.
2. Deséchelo después del primer uso. La tira reactiva no se puede utilizar más de una vez.
3. No utilice la prueba después de la fecha de caducidad impresa en la bolsa de aluminio.
4. No utilice el kit si la bolsa está perforada o no está bien sellada.
5. Mantener fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

1. Conservar a una temperatura entre 4 °C y 30 °C en la bolsa sellada hasta la fecha de caducidad.
2. Mantener alejado de la luz solar directa, la humedad y el calor.
3. NO CONGELAR.
4. Debe realizar la prueba poco después de abrir la bolsa. Debe mantener la prueba en un ambiente seco antes de su uso.

¿CUÁNDO DEBE RECOGERSE LA ORINA PARA LA PRUEBA?


En muchas mujeres, la HCG puede detectarse con esta prueba al día siguiente de la falta del período. Cualquier muestra de orina es adecuada para la prueba de embarazo, pero la muestra de orina de la primera micción matutina es la óptima debido a su mayor concentración de HCG.

¿CÓMO RECOGER LA ORINA?

Las muestras de orina pueden recogerse en cualquier recipiente limpio y seco, de plástico o de vidrio.

¿CÓMO REALIZAR LA PRUEBA?

1. La tira reactiva y la orina deben estar a temperatura ambiente para realizar la prueba.
2. Retire la tira reactiva de la bolsa sellada.
3. Sumergir la tira en la orina con la flecha apuntando hacia la orina. Retirar la tira después de 5 segundos y colocarla en posición horizontal sobre una superficie limpia, seca y no absorbente (como la boca del recipiente de orina).
IMPORTANTE: No permita que el nivel de orina supere el MAX (línea marcadora), de lo contrario la prueba no se realizará correctamente.
4. Lea los resultados en cinco minutos. Los resultados positivos pueden aparecer a veces en tan solo un minuto, pero debe esperar los 5 minutos completos antes de determinar un resultado negativo. No lea los resultados después de más de 5 minutos.

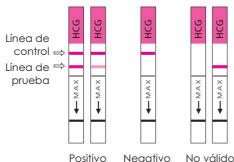

¿CÓMO INTERPRETAR LOS RESULTADOS?

Negativo (no embarazada):

Solo aparece una banda de color en la zona de control. No hay ninguna banda aparente en la zona de prueba. Esto indica que no se ha detectado ningún embarazo.

Positivo (embarazada):

Aparecen bandas de color distintivas en las zonas de control y de prueba. Esto indica que está embarazada.

No válida:

No se ve ninguna banda o solo se ve una banda en la zona de prueba y no en la zona de control. Repita la prueba con un nuevo kit.

NOTA: Si el color de la zona de prueba es débil, se recomienda repetir la prueba en 48 horas, o si la prueba da negativo pero usted. Si sospecha que aún puede estar embarazada, puede repetir la prueba al cabo de unos días.

QUÉ HACER CUANDO CONOCES EL RESULTADO

SI EL RESULTADO ES POSITIVO (DOS LÍNEAS)

Consulte a su médico. Él o ella deberá confirmar su embarazo tras evaluar todos los resultados clínicos y de laboratorio. En algunas situaciones poco frecuentes, la prueba puede dar un resultado falso positivo. Él o ella también le proporcionará más información y consejos sobre su embarazo.

Véase también «Comprender los resultados de la prueba».

SI EL RESULTADO ES NEGATIVO (UNA LÍNEA)

Si tiene motivos para creer que está embarazada (por ejemplo, no tiene la menstruación), puede repetir la prueba unos días más tarde. Si la prueba sigue siendo negativa, consulte a su médico.

Véase también «Comprender los resultados de la prueba».

COMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA

1. Si una muestra de orina está demasiado diluida, es posible que no contenga un nivel representativo de hCG. Si aún se sospecha un embarazo, se debe recoger otra muestra de orina 48 horas después y analizarla.
2. Una concentración baja de hCG en un embarazo muy temprano puede dar un resultado negativo. En este caso, se debe obtener otra muestra al menos 48 horas después y analizarla.
3. Cualquier tratamiento con hCG puede dar lugar a resultados falsos.

RESULTADOS ESPERADOS

Aunque los niveles tempranos de hCG en mujeres embarazadas normales varían, esta prueba de HCG muestra los resultados más precisos el primer día después de la falta de la menstruación.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. Hay mucha diferencia entre las líneas de control de las dos pruebas. ¿Es esto motivo de preocupación?
No. Las variaciones en el color de la banda de control no afectan al resultado de la prueba.
2. ¿Se pueden interpretar los resultados de la prueba después de más de cinco minutos?
No. Los resultados de la prueba deben leerse en 5 minutos. Un resultado negativo puede cambiar a un falso positivo en cuestión de minutos tras finalizar el periodo de prueba, lo que no sería una lectura precisa. Siempre es mejor leer los resultados al cabo de los 5 minutos del periodo de prueba y luego desechar la prueba para evitar confusiones.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Sensibilidad:

La prueba One Step HCG tiene una sensibilidad de 10 mIU/ml.

Sustancias interferentes:

Se añadieron las siguientes sustancias potencialmente interferentes a muestras negativas y positivas de hCG, sin que se observaran interferencias

Acetaminofén, aspirina, ácido ascórbico, atropina, cafeína, glucosa, hemoglobina, tetraciclina, ampicilina, albúmina, bilirrubina.

Estabilidad tras la primera apertura:

Los resultados de los estudios de estabilidad del envase abierto muestran que la calidad del producto se mantuvo estable y válida durante 1,5 horas. Dadas las variaciones de temperatura y humedad que pueden producirse, recomendamos utilizar la prueba inmediatamente después de abrirla.

ÍNDICE DE SÍMBOLOS

	Fabricante		Fecha de fabricación
	Representante europeo		Límite de temperatura
	Fecha de caducidad		No reutilizar
	Código de lote		Consulte las instrucciones
	Precaución		Diagnóstico in vitro
	Contiene suficiente cantidad para <n> pruebas		Número de catálogo

Más detalles en [Babyplan.com/smile](https://www.babyplan.com/smile)

**MANUFACTURED FOR**

Smilelab Co., Ltd.

B-321, 167, Songpa-daero, Songpa-gu,
Seoul, 05855, Republic of Korea

© 2021 Smilelab Co., Ltd.

www.smilelab.co

MADE IN CHINA

Co-Innovation Biotech Co. Ltd

No. 9 Baihe 3 Street, Economic And
Technological Development East Zone,
Guangzhou 510530, Guangdong P.R. China
Tel:+86-20-82109823 Fax:+86-20-82109823



Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175 Fax:+49-40-255726



E-Invasion A/S

Artillerivej 86, 1
2300 Copenhagen
Denmark

E-mail: info@babyplan.com

**Babyplan®**

When big dreams come true it's often the
little things that make the big difference.
Let Babyplan help you increase your
chances of getting pregnant.

Babyplan.com